產品保固卡


型號：　　序號：

銷售日期：　　年　　月　　日

銷售人員簽章

經銷商店章

SINCE 1981 Nova光星

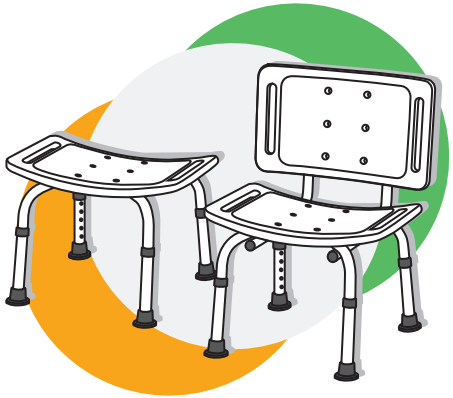

洗 澡 椅

使用說明書/保固卡

NOVA機械椅(未滅菌)

衛部醫器製壹字第004847號

前言

- 序言：

  感謝您選擇使用本產品，建議您在首次操作產品前，請完整詳閱說明書，瞭解正確的使用知識與基本的保養維護，讓您擁有更完善的照護與行動力。
  若有任何操作上的問題或其他的服務需求，請洽購買的專業經銷商諮詢。


- 設計理念：

  以安全、便利、舒適為理念，透過乘坐洗澡椅的方式來減少因關節或肌力退化...等因素所可能產生的跌倒風險，同時以大面積弧型設計的 PE 座墊增加了乘坐的舒適性。此外，9020 洗澡椅配備了弧形背靠以支撐上肢軀幹來提升沐浴時的穩定與安全性。

注意事項

- 調整洗澡椅高度後，請務必確認四根腳管是否皆等高再使用，以免重心不穩造成翻覆危險。
- 若更換鞋子有高低落差之時，請務必微調洗澡椅高度後再使用，以達最佳使用效果避免造成傷害。
- 使用前必須檢查骨架結構是否變形，螺絲是否鎖緊，腳墊有無碎裂等情形。
- 使用洗澡椅時，建議於平地使用，避免於崎嶇地面使用，以免發生危險。
- 當使用者初次使用或身體狀況不佳時，建議有陪同人員協助，避免獨自使用以確保安全。

部位介紹

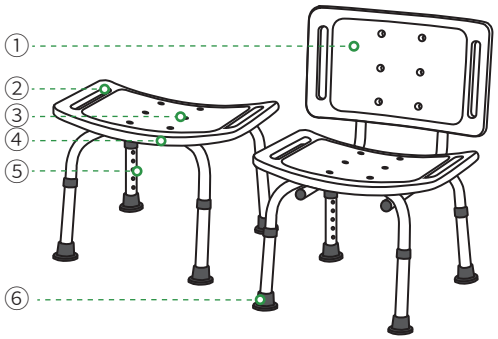

9010
無背靠式洗澡椅

9020
背靠式洗澡椅

① 弧型背墊	④ 弧型座墊
② 抓握握把	⑤ 高度調整孔
③ 排水孔洞	⑥ 防滑腳墊

技術規格

- 主體材質：鋁合金
- 主體管徑：一吋 (25.4 mm)
- 主體顏色：銀色
- 座墊顏色：米白色
- 座/背墊材質：PE 塑膠
- 座寬：50 cm
- 座深：28.5 cm
- 座高：33-43 cm (五段調整)
- 全寬：49.5 cm
- 全深：29 cm
- 最大荷重：100 kg

日常保養

1、基礎清潔

- 清潔產品時，請勿使用含任何化學物品之清潔劑，用乾布擦拭即可。

2、日常檢驗

- 檢查骨架結構是否有彎曲變形而產生高低落差。
- 檢查是否有任何零件鬆動或損壞。
- 使用過程中是否流暢且無任何異音出現。
- 當座墊、背墊、腳墊...等耗材磨損嚴重時，請至經銷商檢查並更換新配件，以確保使用者安全。

保固說明


1、保固範圍

- 產品於正常使用及維護下，主體骨架為兩年期保固。
- 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。


2、非保固範圍

- 耗材配件不列入保固範圍，如：座墊、背墊、腳墊...等。
- 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成任何之損傷者。
- 自行拆裝、任意變換部品規格零件亦或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損傷者。
- 無法辨識本公司之產品標籤且遺失保固卡者。
- 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。

9010洗澡椅-組裝零件

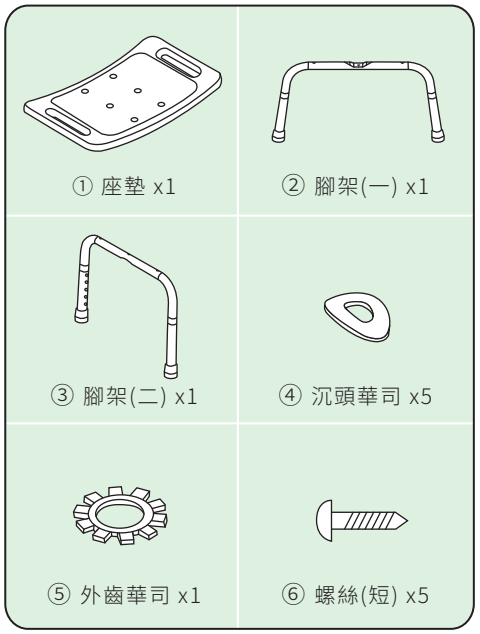


如何組裝 9010 洗澡椅

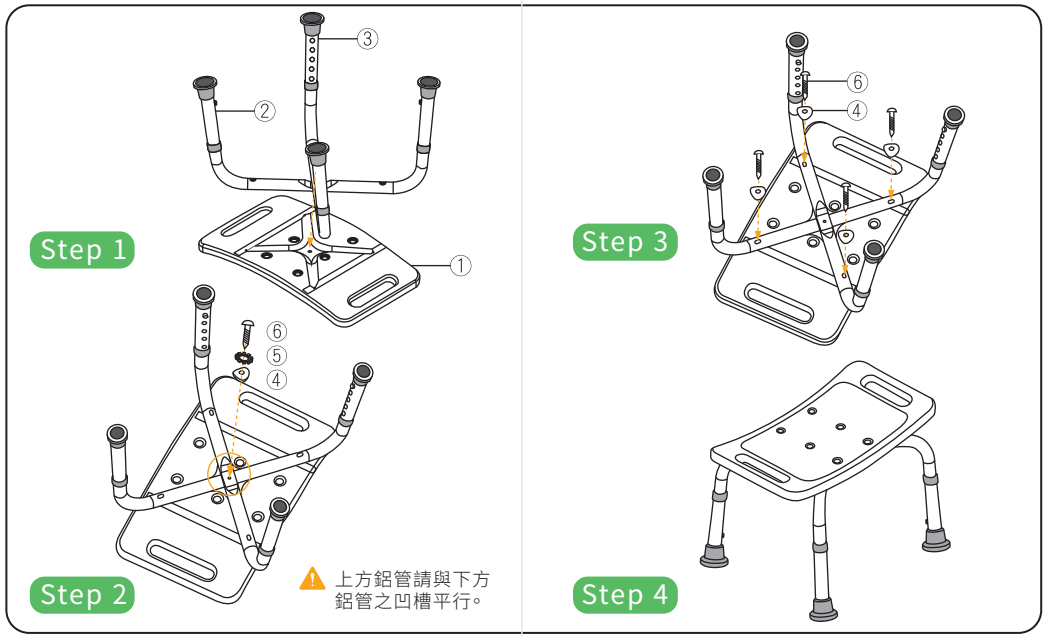

如何調整洗澡椅高度


- 按下銅珠同時將內管稍微旋轉後即可上下調整內管高度。
- 沿著調整孔將洗澡椅調整到適合自己身形的高度。
- 確定位置後，務必使銅珠彈出調整孔，以維持調整後的洗澡椅高度。
- 洗澡椅的四根腳管須調整至相同高度後才可使用。

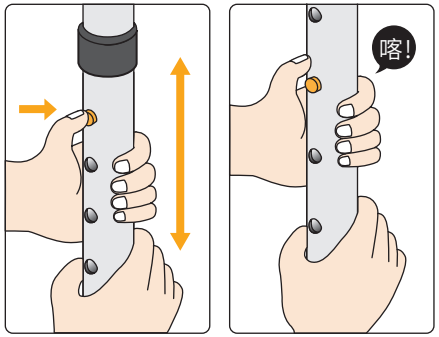

9020洗澡椅-組裝零件



如何組裝 9020 洗澡椅

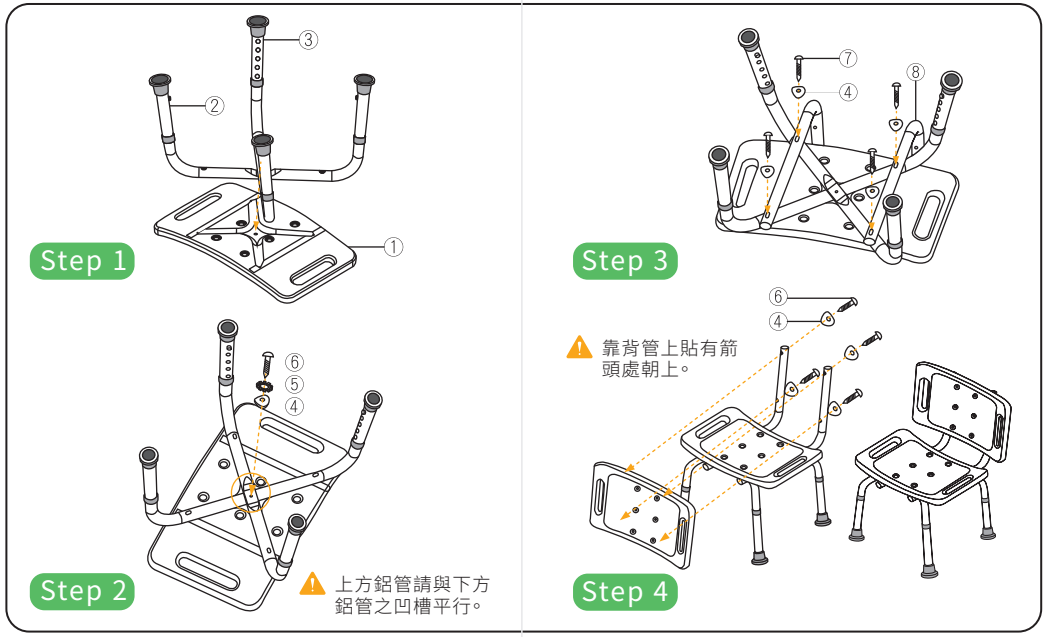

光星骨科復健器材股份有限公司
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE .,INC

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路1096、1102號