產品保固卡

銷售日期：　　年　　月　　日

銷售人員簽章

經銷商店章

Nova光星 SINCE 1981



馬 桶 椅

使用說明書/保固卡

NOVA機械椅(未滅菌)

衛部醫器製壹字第004847號

前言

- 序言：

  感謝您選擇使用本產品，建議您在首次操作產品前，請完整詳閱說明書，瞭解正確的使用知識與基本的保養維護。若有任何操作上的問題或其他的服務需求，請洽購買的專業經銷商諮詢。


- 設計理念：

  本產品可放置於臥室內或鄰近寢具，讓行動不便者能夠就近如廁，進而降低徒步移動到浴廁時，因重心不穩或者燈光昏暗...等任何可能導致跌倒所造成二次傷害的風險。透過可收合式設計，減少收納放置的體積佔用，達到空間的靈活運用也更方便走動。

注意事項

- 使用前，請確認水桶組是否有確實固定於主體上。
- 乘坐時，若雙腳與地面有落差，請務必調整腳管高度後再使用，以達最佳使用效果，避免造成傷害。
- 調整馬桶椅高度後，請務必確認四根腳管是否皆等高再使用，以免重心不穩造成翻覆危險。
- 使用前必須檢查骨架結構是否變形，螺絲是否鎖緊，腳墊有無碎裂等情形。
- 使用馬桶椅時，建議於平地使用，避免於崎嶇地面使用，以免發生危險。
- 當使用者初次使用或身體狀況不佳時，建議有陪同人員協助，避免獨自使用以確保安全。

部位介紹

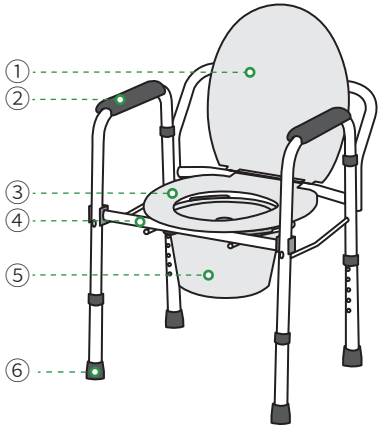

① 馬桶蓋	④ 水桶固定架
② 扶手	⑤ 水桶
③ 馬桶座	⑥ 防滑腳墊

技術規格

- 品名：8700AF 標準收合型(硬座墊)馬桶椅
- 主體材質：鐵
- 主體管徑：一吋 (25.4 mm)
- 座墊材質：塑膠
- 座寬：40 cm
- 座深：40 cm
- 座高：42-52 cm (五段調整)
- 水桶架高度：37 cm
- 全寬：52.5 cm
- 全深：40 cm
- 全高：65-75 cm
- 最大荷重：120 kg
- 重量：6.8 kg

日常保養

1、基礎清潔

- 清潔產品時，請勿使用含任何化學物品之清潔劑，用乾布擦拭即可。

2、日常檢驗

- 檢查骨架結構是否有彎曲變形而產生高低落差。
- 檢查是否有任何零件鬆動或損壞。
- 使用過程中是否流暢且無任何異音出現。
- 當馬桶座蓋組、水桶、腳墊...等耗材磨損嚴重時，請至經銷商檢查並更換新配件，以確保使用者安全。

保固說明


1、保固範圍

- 產品於正常使用及維護下，主體骨架為兩年期保固。
- 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。


2、非保固範圍

- 耗材配件不列入保固範圍，如：水桶組、馬桶座蓋組、腳墊...等。
- 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成任何之損傷者。
- 自行拆裝、任意變換部品規格零件亦或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損傷者。
- 無法辨識本公司之產品標籤且遺失保固卡者。
- 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。

組裝零件

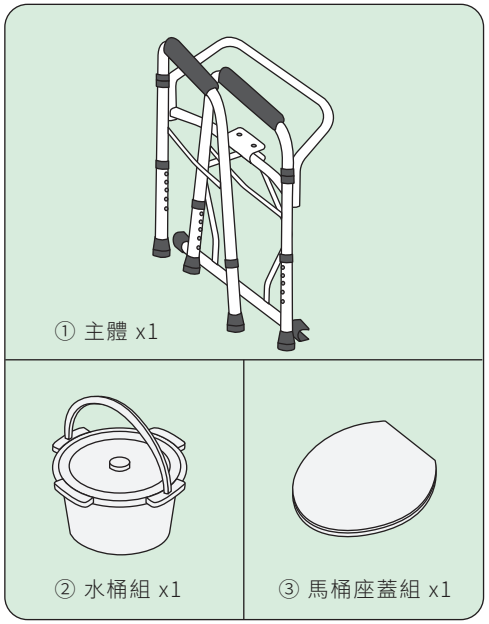

組裝步驟

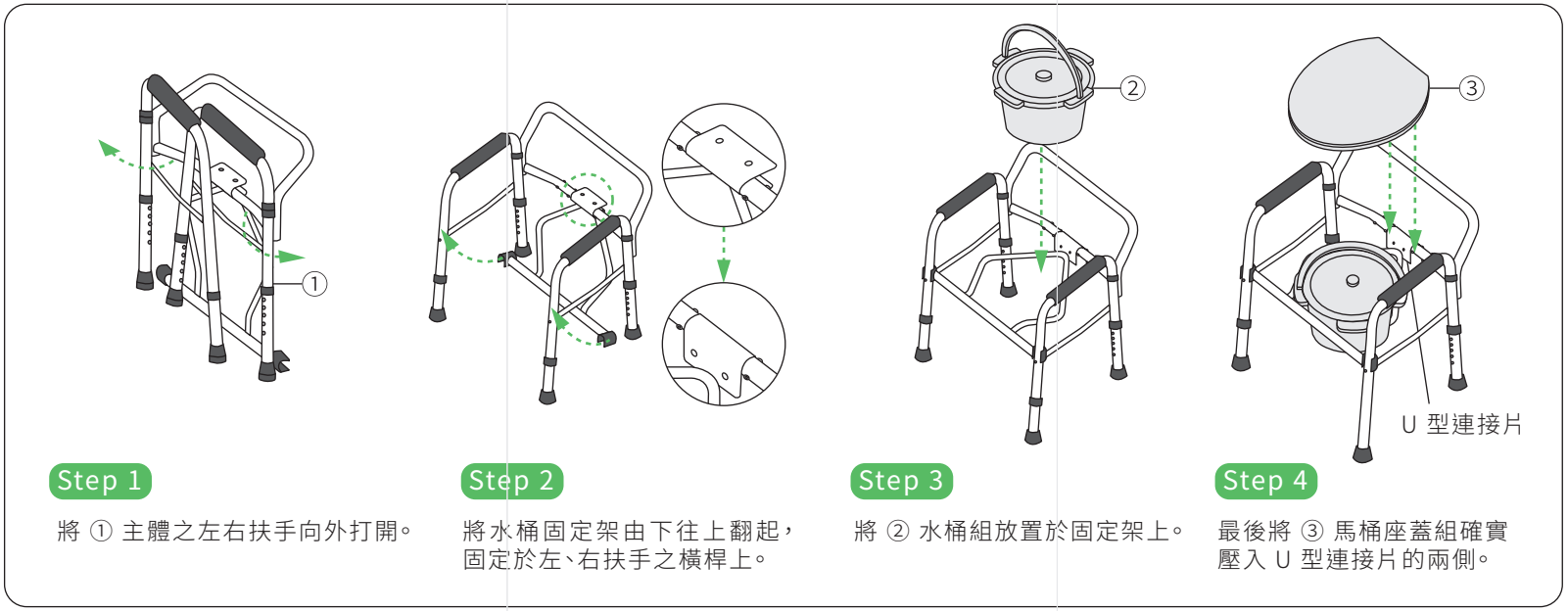

Step 1

將 ① 主體之左右扶手向外打開。

Step 2

將水桶固定架由下往上翻起，固定於左、右扶手之橫桿上。

Step 3


將 ② 水桶組放置於固定架上。

Step 4


最後將 ③ 馬桶座蓋組確實壓入 U 型連接片的兩側。

如何調整高度

- 按下銅珠同時將內管稍微旋轉後即可上下調整內管高度。
- 沿著調整孔將馬桶椅調整到適合自己身形的高度。
- 確定位置後，務必使銅珠彈出調整孔，以維持調整後的馬桶椅高度。
- 馬桶椅的四根腳管須調整至相同高度後才可使用。

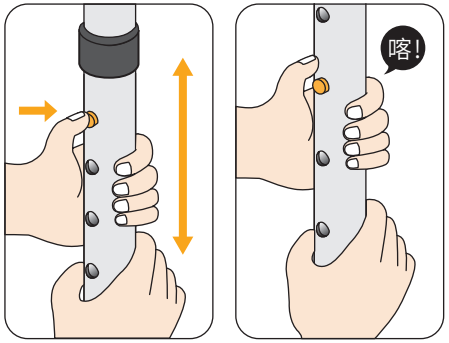

如何使用

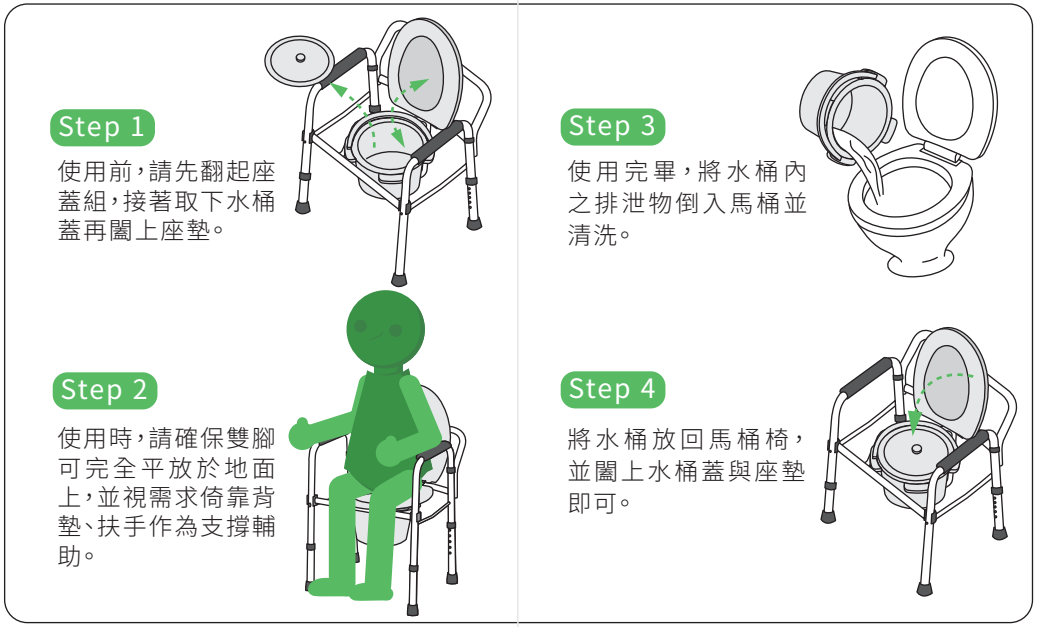

Step 1

使用前，請先翻起座蓋組，接著取下水桶蓋再闔上座墊。

Step 2

使用時，請確保雙腳可完全平放於地面上，並視需求倚靠背墊、扶手作為支撐輔助。

Step 3

使用完畢，將水桶內之排泄物倒入馬桶並清洗。

Step 4

將水桶放回馬桶椅，並闔上水桶蓋與座墊即可。

光星骨科復健器材(股)公司二廠
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE, INC.

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路 1096、1102 號