產品保固卡

銷售日期：　　年　　月　　日
銷售人員簽章
經銷商店章

Nova光星 SINCE 1981

ToFree 腋下拐杖

使用說明書/保固卡

“光星”醫療用枴杖(未滅菌)

衛部醫器輸壹登字第020825號

前言

- 序言：

  感謝您選擇使用本產品，建議您在首次操作產品前，請完整詳閱說明書，瞭解正確的使用知識與基本的保養維護，讓您擁有更完善的照護與行動力。
  若有任何操作上的問題或其他的服務需求，請洽購買的專業經銷商諮詢。


- 設計理念：

  為了減少受傷肢體負荷、疼痛，並同時可以支撐身體重量而設計出的腋下拐杖，適用於腳關節術後之康復期間，藉以幫助恢復身體健康。

注意事項

- 依據使用者下肢狀態可分為單側或雙側的使用方式。
- 使用者需有良好的上肢操控能力。
- 使用腋下拐杖時，請穿著合腳防滑的鞋子，若更換鞋子有落差之時，務必微調高度後再使用，以達最佳使用效果避免造成傷害。
- 使用前必須檢查骨架結構是否變形，螺絲是否鎖緊，腳墊有無碎裂等情形。
- 若要使用腋下拐杖來上下樓梯時，請務必先熟悉使用方式再進行，以免發生危險。
- 避免於地面潮濕、光線不足及有障礙物時行走，以免滑倒或絆倒。
- 當使用者初次使用或身體狀況不佳時，建議有陪同人員協助，避免獨自使用以確保安全。

部位介紹

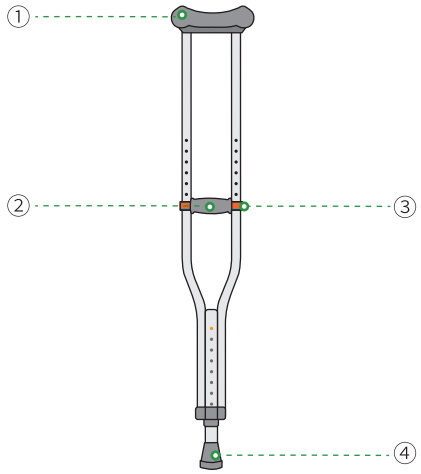

① 腋下墊	③ 握把高度調整卡榫
② 手握把	④ 腳墊

技術規格

- 產品名稱：V7207
- 產品型號：ToFree 腋下拐杖
- 腋下墊材質：TPR
- 握把材質：TPE
- 腳墊材質：橡膠
- 主體材質：鋁合金
- 主體管徑：七分 (22.2 mm)
- 主體顏色：天空藍 / 深鐵灰 / 薄荷綠
- 調整高度：如下表 (八段式調整)
- 最大荷重：120 kg

尺寸	S	M	L
適用身高 (cm)	140~160	160~180	180~200
重量 (kg/pc)	0.916	0.988	1.044
調整高度 (cm)	98~116	118~136	138~156

日常保養

1、基礎清潔

- 清潔產品時，請勿使用含任何化學物品之清潔劑，用乾布擦拭即可。

2、日常檢驗

- 檢查骨架結構是否有彎曲變形而產生高低落差。
- 檢查是否有任何零件鬆動或損壞。
- 使用過程中是否流暢且無任何異音出現。
- 當腋下墊、握把、腳墊...等耗材磨損嚴重時，請至經銷商檢查並更換新配件，以確保使用者安全。

保固說明

1、保固範圍

- 產品於正常使用及維護下，主體骨架為兩年期保固。
- 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。

2、非保固範圍

- 耗材配件不列入保固範圍，如：腋下墊、手握把、握把高度調整結構、腳墊...等。
- 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成任何之損傷者。
- 自行拆裝、任意變換部品規格零件亦或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損傷者。
- 無法辨識本公司之產品標籤且遺失保固卡者。
- 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。


如何調整拐杖高度

調整拐杖長度

- 按下高度調整鈕，同時將內管稍微旋轉即可上下調整長度。
- 確定位置後，務必使調整鈕彈出調整孔，以維持調整後的拐杖長度。


調整握把高度

- 扳開握把兩側的卡榫，即可上下調整高度。
- 將握把移至適合的孔位後，壓緊卡榫，即可完成調整。

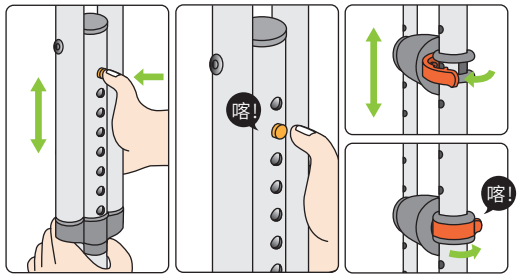

如何調整適合自己的高度

- 穿著日常行走的鞋子。
- 可參考拐杖下方調整孔旁標示的身高數值作為依據進行調整。
- 將拐杖放置於距離腳掌外側斜前方約 15 公分，拐杖頂端距離使用者腋下應有 2～3 指寬的距離。
- 當手持握把時，握把請調整至手肘彎曲約 20 度的高度。

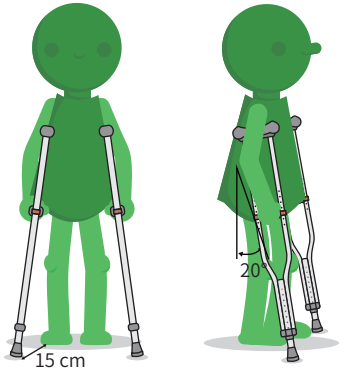

適合自己的行走步態

擺盪步態

患肢於「無法承重」時期，請使用雙側腋下拐杖。


三點步態

患肢於「可稍微承重」時期，請使用雙側腋下拐杖。

兩點步態

患肢於「鼓勵承重」時期，請使用單支腋下拐杖。

擺盪步態

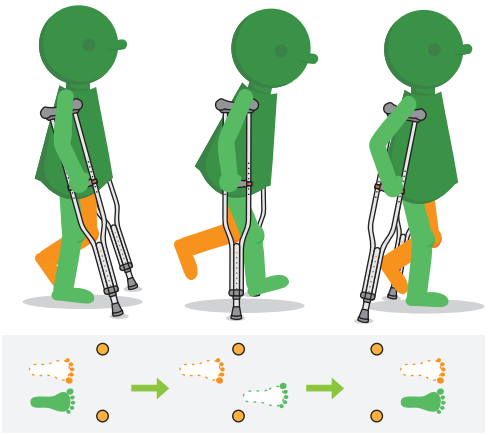


Step 1 雙側拐杖向前支撐。

Step 2 透過手握把支撐將身體重心向前，並將健側腳向前擺盪。

Step 3 向前擺盪過後，健側腳緩慢著地。

三點步態

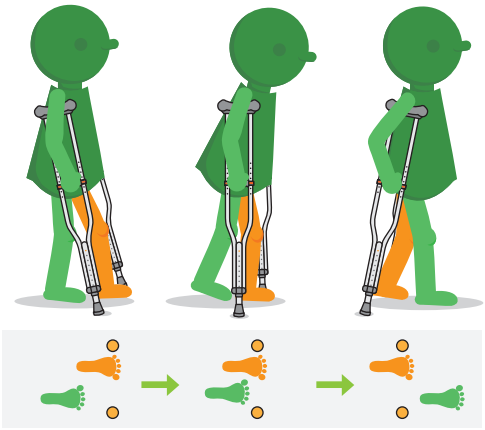


Step 1 雙側拐杖和患側同時向前跨出。

Step 2 透過手握把支撐將身體重心向前。

Step 3 將健側腳向前跨越並緩慢著地。

兩點步態

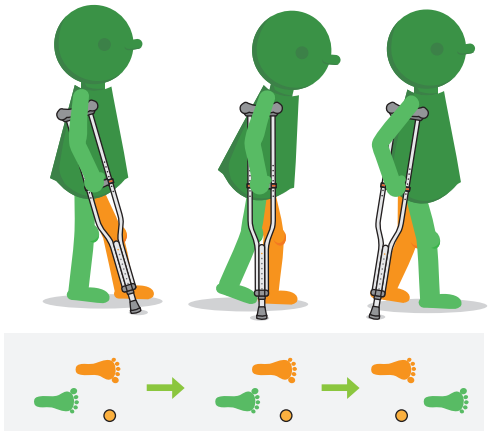


Step 1 使用單支腋下拐支撐於健側，拐杖與患側同時跨出。

Step 2 透過手握把支撐將身體重心向前。

Step 3 將健側腳向前跨越並緩慢著地。

如何上下樓梯

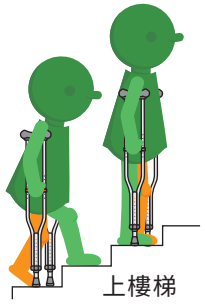


Step 1 將身體重量置於兩側拐杖上。

Step 2 由健側腳用力登上一階樓梯。

Step 3 將患側腳和拐杖帶上同一級階梯。

上樓梯

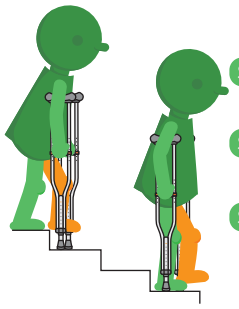

Step 1 由健側腳支撐身體重量。

Step 2 將兩側拐杖置於下一階的樓梯上。

Step 3 拐杖向下撐住，將健側腳登往同一級階梯上。

下樓梯

光星骨科復健器材股份有限公司
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE .,INC

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路1096、1102號