產品保固卡

銷售日期：　　年　　月　　日
銷售人員簽章
經銷商店章

SINCE 1981 Nova光星

CONPAL 2 抑速輪

使用說明書/保固卡

前言

- 序言：

  感謝您選擇使用本產品，建議您在首次操作產品前，請完整詳閱說明書，瞭解正確的使用知識與基本的保養維護，讓您擁有更完善的照護與行動力。
  若有任何操作上的問題或其他的服務需求，請洽購買的專業經銷商諮詢。

- 設計理念：

  CONPAL 2 抑速輪是由日本運輸大廠 Nabtesco 株式會社針對助步車所開發的抑速輪組，能安裝於 Nova 光星 STAR 與 STAR mini 助步車上使用。輪體採用離心剎車技術，隨推行速度增加，作用於輪組的阻力會同步增強，而產生自動減速機制，提升行走或下坡時的安全與穩定性。適合下肢行動力不佳，且使用手動剎車較吃力的族群，期許給予更安心的外出體驗。

注意事項

- 乘坐或起身助步車前，務必確認手剎車已設為駐車模式。
- 使用前確保產品中心蓋已安裝，以防灰塵或水分進入抑速輪內部，影響剎車性能，增加跌倒風險。
- 不得隨意調整抑速輪阻力模式，錯誤調整可能提高跌倒風險。
- 行駛上下坡時，應輕微啟動手剎車以提供阻力，緩慢行進以確保安全。
- 助步車兩側皆必須安裝抑速輪，且阻力控制器應調整至相同設置，避免剎車效果不均。
- 禁止在CONPAL 2 裝置上塗抹油或油脂。
- 請勿在過於光滑或陡坡上使用本產品，以免剎車阻力不足，導致摔倒。
- 請避免在雨天或濕滑地面上使用，產品不具完全防水功能。

部位介紹



① 中心蓋	④ 軸承襯套
② 胎皮	⑤ 墊片
③ L型連結片	⑥ 螺母

技術規格

- 產品名稱：CONPAL 2 抑速輪
- 輪胎外徑：8 吋 (20.4cm)
- 輪胎寬度：3.5cm
- 輪胎重量：1.1kg
- 最大荷重：100kg
- 速度調節：極低/低/中/高 (四個級別)
- 步行速度上限設定：
  - 極低：3.2 km/h
  - 低：2.6 km/h
  - 中：1.8 km/h
  - 高：1.2 km/h
- 產地：日本

日常保養

1、基礎清潔

- 請使用乾布或刷子清除泥土、污垢和灰塵。
- 當產品特別髒污時，請用擰乾的濕布擦拭。
- 請勿使用水、油、肥皂水、清潔劑等清潔。

2、日常檢驗

- 定期檢查胎皮或車輪是否有裂痕、變形或磨損。若胎皮表面的凹槽已磨損至平坦，請至經銷商檢查並更換配件，以確保使用者安全。
- 請確認阻力控制裝置正常運作，使用時兩側阻力應設為相同值。
- 請確保所有零件及中心蓋已安裝並鎖固，使用過程中應流暢無異音。
- 請勿將產品置於潮濕、風吹或高溫環境中，以防零件損壞。
- 每次使用前進行日常檢查，每年進行一次全面檢查。
- CONPAL 2 的耐用年限約為五年，建議五年後更換整個裝置。

保固說明

1、保固範圍

- CONPAL 2 抑速輪於正常使用及維護下，主體為一年期保固。
- 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。
- 本產品僅適用於 STAR 與 STAR mini 助步車。


2、非保固範圍

- 耗材配件不列入保固範圍，如：胎皮...等。
- 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成任何之損傷者。
- 自行拆裝、任意變換部品規格零件亦或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損傷者。
- 無法辨識本公司之產品標籤且遺失保固卡者。
- 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。

組裝零件



① 抑速輪 x2

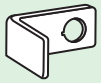

② L 型連結片 x2



③ 軸承襯套 x2



④ 墊片 x2




⑤ 螺母 x2




⑥ 三號六角扳手 x1

組裝步驟

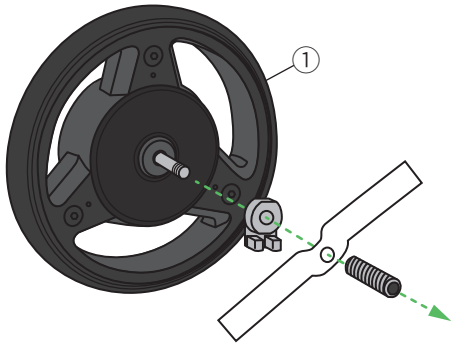


Step 1

拆除原廠包裝紙與零件。

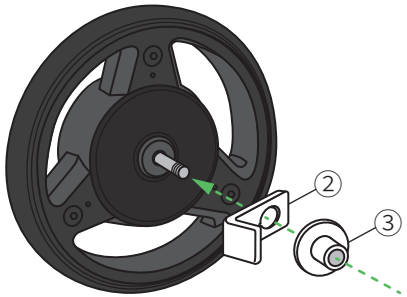

Step 2

將 L 型連結片對齊裝置上的凸出部位，安裝軸承襯套以完成組裝。

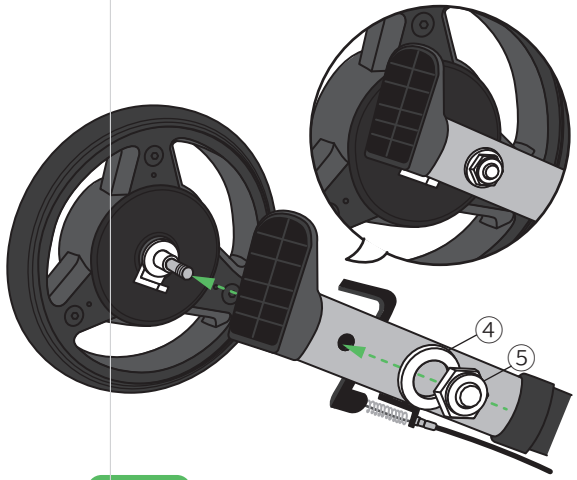

Step 3


按照 L 型連結片的形狀位置裝上助步車，接著安裝墊片和螺母，再使用工具將螺母鎖緊。

如何調整阻力



Step 1

打開抑速輪的中心外蓋。

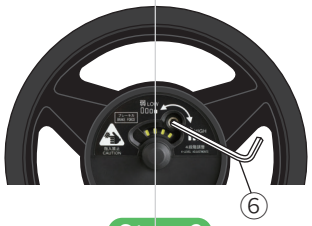

Step 2

使用六角扳手插入調整孔。



Step 3

進行阻力調整。



極低
3.2 km/h

低
2.6 km/h

中
1.8 km/h

高
1.2 km/h

CONPAL 2 抑速輪提供四種阻力模式，請根據使用者需求，調整至最適當的阻力設定。

影片說明

掃描 QRcode
立即觀看 CONPAL 2 抑速輪
組裝及調整影片說明

光星骨科復健器材股份有限公司
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE .,INC

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路1096、1102號