SINCE 1981 Nova光星

ShawnSure

雙向收合型助步車

|產品使用說明書|

品名：”光星”助行器 (未滅菌)
衛署醫器輸壹字第 008369 號
<使用前請務必詳閱原廠之說明書並遵照指示使用>

2026.ver 01

目錄

一、大綱

1、序言 ---- 01
2、設計理念 ---- 01
3、警示標誌 ---- 01

二、安全提示

1、注意事項 ---- 02

三、產品概觀

1、開箱部品 ---- 03
2、產品標籤 ---- 03
3、部位介紹 ---- 04
4、技術規格 ---- 05

四、使用前概覽

1、組裝引導 ---- 06
2、收合與展開引導 ---- 07
3、調整手握把高度 ---- 09
4、調整背靠高度 ---- 10
5、導線式剎車 ---- 10
6、調整剎車鬆緊 ---- 11
7、輔助踏墊 ---- 12
8、調整拐杖架位置 ---- 12

五、開始使用

1、如何使用助步車行走 ---- 13
2、如何正確坐上助步車 ---- 14

六、日常保養

1、基礎清潔 ---- 15
2、日常檢驗 ---- 15

七、產品保固

1、保固範圍 ---- 16
2、非保固範圍 ---- 16

八、維修記錄

1、維修記錄 ---- 17

一、大綱

1、序言

謝謝您選擇使用 ShawnSure 雙向收合型助步車，此款助步車的舒適性與卓越的品質必能讓您滿意。在首次操作產品前，請完整詳閱此說明書，以保障使用者的安全，若有任何操作上的問題或其他的服務需求，請洽購買的專業經銷商諮詢。

2、設計理念

ShawnSure 雙向收合型助步車以「輕巧便利」為核心，結合快速收合機構與極致收納設計，突破空間限制，實現靈活攜帶與存放需求。產品可依使用者身形調整握把高度及背靠高度，並配備舒適乘坐區，於行走過程中提供穩定支撐，協助維持日常生活的行動力。讓使用者能輕鬆因應多樣化環境，兼顧安全性與便利性，展現助步車的全方位價值。

3、警示標誌

警示標誌一共區分為三種，分別是警告、注意、建議，請詳細閱讀該警示標誌內容以確保使用者自身安全。

警告

風險性極高，若不遵守則可能導致重大傷害。

注意

若不遵守則可能導致產品損傷或者影響自身安全。

建議

建議遵循以降低風險。

二、安全提示

1、注意事項

注意


為了避免不當使用或不熟悉產品而導致潛在的危險發生，我們強烈建議在初次使用時有介護人員在旁協助並且必須先在平坦或熟悉的地面上練習。


以下為注意事項，請務必遵守以免導致任何意外發生。

- 使用 ShawnSure 雙向收合型助步車前，請確認所有零件螺絲都確實的鎖緊。
- 上下 ShawnSure 雙向收合型助步車時，請務必確認手剎車為駐車模式。
- 請勿坐在 ShawnSure 雙向收合型助步車上並透過他人推送行駛，否則將造成後翻的危險。
- 請於平坦與堅固的地面上使用 ShawnSure 雙向收合型助步車。
- 請勿在手握把處懸掛包包或重物以避免前後重量分配不均導致助步車有翻覆的危險。
- 行駛上下坡時，請務必稍微作動手剎車使助步車行駛時可產生阻力，緩步慢走以確保安全。
- 請注意座墊可能因太陽直接照射過熱而對皮膚造成傷害，盡量避免讓 ShawnSure 雙向收合型助步車直照陽光，若無法避免時，請用遮蔽物將其蓋住。
- 使用 ShawnSure 雙向收合型助步車除了輔助行走之外，不得有其他用途，也不得當攀爬高處用之輔具或運輸重物。
- 置物袋最大荷重為 5 kg，請勿超出荷重負載。
- 請勿在飲酒或食用任何含酒精成分食物後使用 ShawnSure 雙向收合型助步車，因精神狀況不佳及判斷能力不良的情況下，可能造成危險或事故發生。
- 請注意身體移動時或者有額外負重時產生的重心變化，乘載重量分配不均時會增加翻覆的機率。
- 必須穿越鐵路平交道時，請遵守鐵路交通規則，並於平交道前暫停，確認左右安全無誤，且軌道不會卡陷車輪再跨越行溝或裂縫間縫等障礙物。

三、產品概觀

1、開箱部品

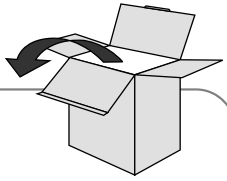

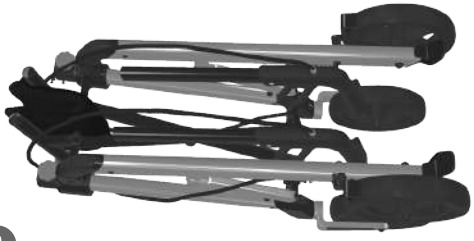

a.



b.



c.



d.

a. ShawnSure 主體	b. 置物袋
c. 使用說明書	d. 產品保固卡

2、產品標籤



注意

生產序號與產品規格標籤皆黏貼於助步車之車體上，所有標籤字樣必須清楚可辨識，若字體模糊或者標籤脫落，請立即聯絡經銷商提供更換以免權益受損。

3、部位介紹


弧形背靠組
座墊
置物袋
8” EVA 前輪組
握把
可駐車式剎車組
握把高度調整旋鈕
拐杖架
後輪剎車片
8” EVA 後輪組
輔助踏板

4、技術規格

產品名稱	ShawnSure 雙向收合型助步車		
尺　　寸	S	M	L
品　　號	4600AC	4600AA	4600AB
主體材質	鋁合金	鋁合金	鋁合金
建議身高 (cm)	150-170	155-175	170-190
握把寬度 (cm)	35	38	41
握把高度 (cm)	77-89.5	83-95.5	90-103.5
座椅寬度 (cm)	34.5	36.5	41.5
座椅高度 (cm)	46	51	58
前輪尺寸 (inch)	8″ EVA	8″ EVA	8″ EVA
後輪尺寸 (inch)	8″ EVA	8″ EVA	8″ EVA
車體全寬 (cm)	55	58	61
車體全長 (cm)	60.5	64	71
車體全高 (cm)	89.5	95.5	103.5
收合尺寸 (cm)	W38.5 x D41 x H78 (不含靠背帶)	W35.5 x D39.5 x H83 (不含靠背帶)	W34 x D38 x H92.5 (不含靠背帶)
置物袋尺寸(cm)	W25.5 x D13.5 x H16.5	W29 x D15 x H20	W31 x D15 x H30
車體重量 (kg)	7.06	7.3	7.7
最大荷重 (kg)	136	136	136


(誤差範圍：±1cm ±0.5kg)

四、使用前導覽


1、組裝引導

Ⅰ.組裝扶手

a. 將左右兩側扶手管件插入孔位。

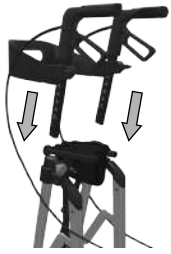


b. 鬆開紅色旋鈕，將旋鈕向外拉出，即可沿著調整孔上下調整內管長度。

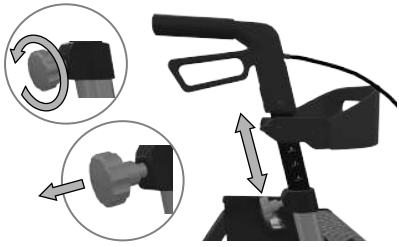


c. 確定位置後，務必使紅色旋鈕嵌入調整孔並順時針旋緊，以維持調整後的手握把高度。

> **注意**
>
> 請務必確認兩側手握把均調整至相同高度，以免重心不穩造成危險。

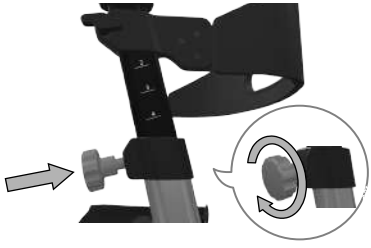

Ⅱ.展開車體


a. 站立於助步車後方，雙手握住左右手握把，同時上壓剎車。再施加適度力量，將助步車輕推向前，使車體逐步展開。

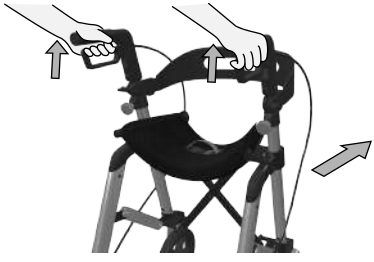

b. 將雙手手掌朝下向下施力壓送到底，使助步車完全展開，並確保座墊布無法隨意收合，即完成展開動作。

警告

請勿將手指放置於座墊與車體間的夾縫處，以免發生危險。

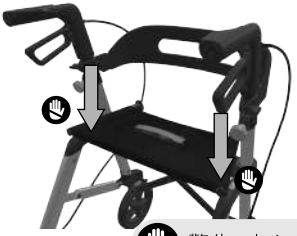

警告：小心夾手

Ⅲ.置物袋組裝

a. 將置物袋上方的織帶固定於座墊前側骨架上，即完成置物袋組裝。




■ 2、收合與展開引導

收合車體

a. 將剎車連桿下壓至底，使其為駐車狀態。



b. 向上拉起座墊布上的提把，使左右及前後車架向內側收合。

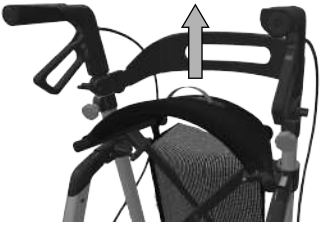

c. 將座墊兩側骨架往內推送，使助步車左右車體收合至最小體積。


警告：小心夾手



展開車體


a. 請參閱使用前概覽 - II.展開車體 Page 06 之步驟說明。

b. 展開後若為駐車模式，請將兩側剎車連桿由下往上輕撥即可解除駐車模式。

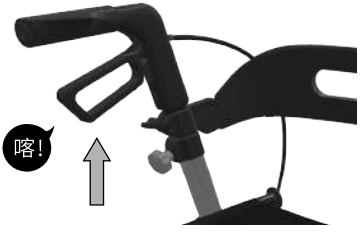

■ 3、調整手握把高度


a. 以手握把高度為基準，調整至切齊腰部或臀部的位置，並且手肘彎曲約莫 20-30 度。

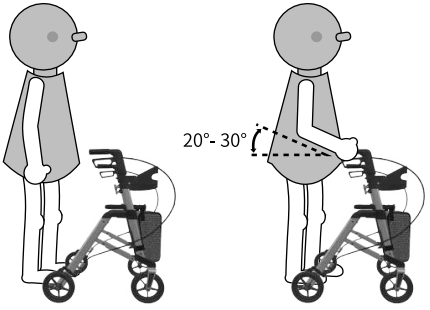

b. 鬆開紅色旋鈕後，將旋鈕向外拉出，即可上下調整內管長度，沿著調整孔將助步車調整到適合自己身形的高度。

注意


高度碼 (1) 為握把最低高度，反之高度碼 (6) 為最高高度。

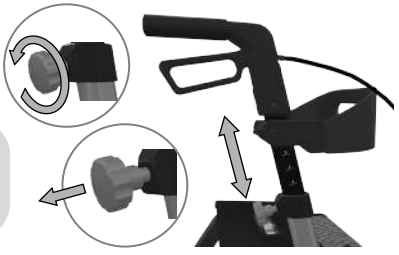

c. 確定位置後，務必使紅色旋鈕嵌入調整孔並順時針旋緊，以維持調整後的手握把高度。


注意

請務必確認兩側手握把均調整至相同高度，以免重心不穩造成危險。

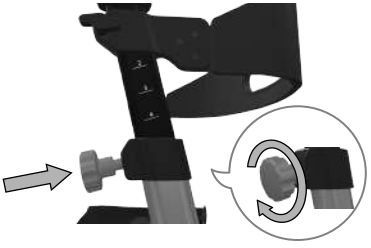


4、調整背靠高度

a. 鬆開背靠上的調整鈕與螺絲，背靠即可上下調整高度，移至適合使用者的舒適位置。

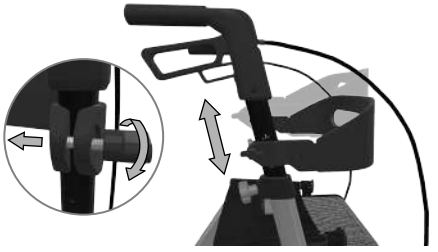

b. 將兩側調整至相同高度後，鎖緊調整鈕，確保背靠無法隨意鬆脫，即完成背靠調整。

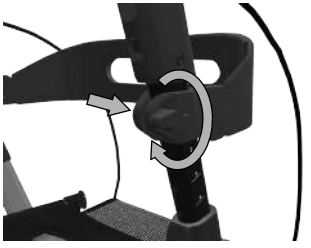


5、導線式剎車

一般使用

a. 推行過程中可根據狀況來上壓剎車連桿使助步車減速停止。

注意

上壓剎車連桿的力道越大越急促，相對的剎車力道也會越強。

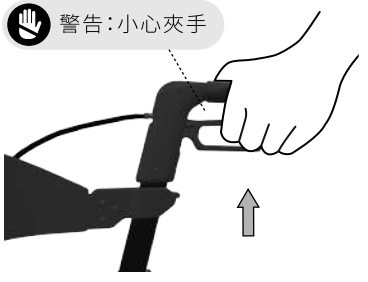

駐車模式

a. 將剎車連桿下壓至底直到發出「喀」聲，並確保後輪不再移動後即完成駐車模式。




解除駐車

a. 在駐車模式下將剎車連桿由下往上輕撥即可解除駐車模式。




6、調整剎車鬆緊

a. 壓下紅色調整旋鈕，並連動下方的六角螺絲進行鬆緊度調整。

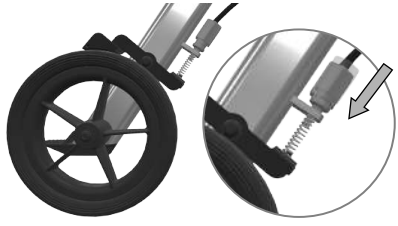

b. 轉動六角螺絲，逆時針旋轉剎車越「緊」；反之，順時針旋轉剎車越放「鬆」。

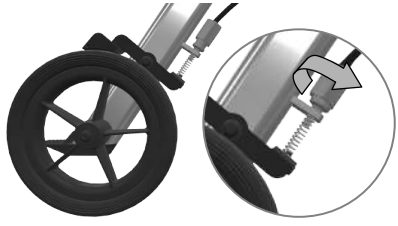

注意

請務必確認兩側剎車均調整至相同鬆緊度，以免操作施力落差造成危險。

7、輔助踏墊

a. 遇到不超過 10cm 的門檻或者路障可以使用輔助踏墊來協助前輪仰起跨過通行。

警告


請勿過度上仰助步車以免重心不穩導致翻覆的危險。



b. 雙手務必緊握手握把，單腳踩踏同邊的輔助踏墊，透過”腳踏下壓”與”手握把下壓”的同步綜合力量來使助步車微微仰起，過程中請勿放手以免發生危險。


警告

請勿單獨使用手握把下壓或腳踏下壓來仰起車體，否則將容易導致重心失衡而發生危險。

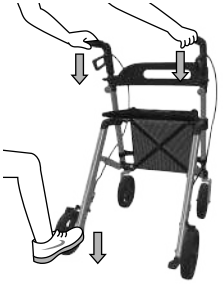


8、調整拐杖架位置

a. 將其中一側的拐杖架 (夾) 零件，垂直向上抽出。轉至另一側，將拐杖架 (夾) 零件垂直向下插入。

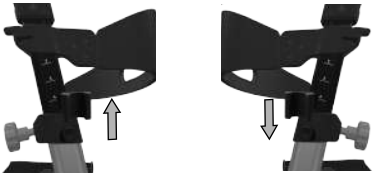

b. 將其中一側的拐杖架 (底座) 零件，垂直向上抽出。轉至另一側，將拐杖架 (底座) 零件垂直向下插入。

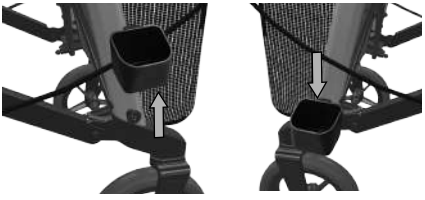

五、開始使用

注意

在操作使用之前，請確保所有銅珠均已完全嵌入，兩側手握把必須同高，以確保用戶安全。


建議

使用 ShawnSure 雙向收合型助步車時，建議於平地使用，避免於崎嶇路面行走，以免發生危險。


1、如何使用助步車行走



a. 站立於助步車後方並手扶握把，雙腳腳尖與後輪呈水平切齊。

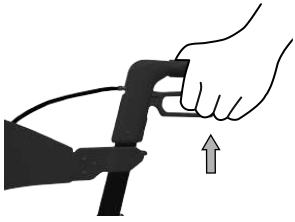

b. 將雙手呈現半握拳狀態握住手握把，其餘四指輕輕倚靠剎車連桿，掌握推行時的剎車效率並於必要時可快速反應以確保安全。

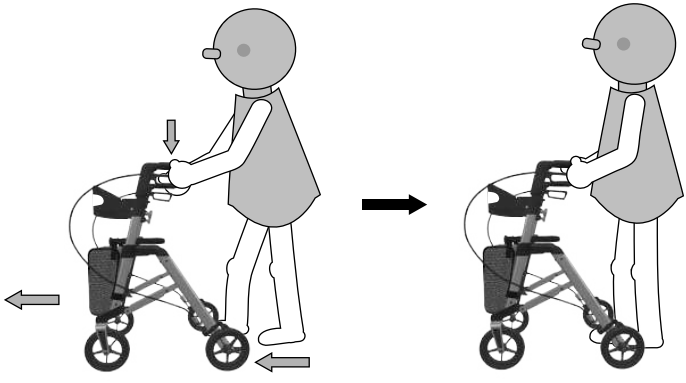

C. 身體重心平均施力於手握把上，視個人狀況跨出單側下肢約一小步距離，並同時將助步車往前推行約一小步的距離，接著另側腳向前跟進，重複上述動作即可。

2、如何正確坐上助步車


a. 請務必先將剎車切替為駐車模式並確認助步車不會滑動。



b. 手扶握把保持身體平衡並緩慢轉身。

警告


請勿將身體重量全部壓於單邊握把上，以免翻覆造成危險。

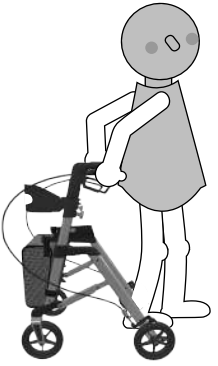

c. 坐下前先將大腿後部靠近座墊的邊緣，抓握手握把緩慢坐下。

注意

坐立時雙腳必須完全平放於地面不可懸空，否則易導致重心不穩而翻覆造成危險。

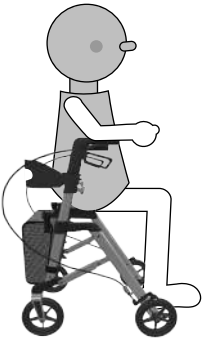



警告

嚴禁當作輪椅使用或載人，否則容易因重心不穩而有翻覆之風險。

六、日常保養

定期的檢驗與保養清潔您的 ShawnSure 雙向收合型助步車將有助於降低產品的損耗進而提高使用壽命。若發現有任何的異狀，請洽本公司客服專線或者專業經銷商諮詢，勿自行拆解。

1、基礎清潔

a. 主體管件請使用微濕的軟毛布擦拭，若有髒污殘留，可使用溫和的清潔劑。
b. 座墊可用軟毛布沾水或者稀釋後的酒精來做擦拭與基礎消毒。
c. 欲清潔輪子時，請使用塑膠毛刷刷洗輪子表面即可，切勿使用金屬毛刷。



注意

請勿直接使用水柱或蒸氣式清潔儀器直接沖洗車體，過多的水氣將會加速軸承老化且降低使用壽命。

2、日常檢驗

a. 檢查骨架結構是否有彎曲變形而產生高低落差。
b. 檢查是否有任何零件鬆動或損壞。
c. 使用過程中是否流暢且無任何異音出現。
d. 當輪胎、剎車片、握把套...等耗材磨損嚴重時，請至經銷商檢查並更換新配件，以確保使用者安全。

七、產品保固

您所購買的 ShawnSure 雙向收合型助步車皆經由本公司出廠認可，本產品保固以經銷商蓋印之所載日期起算，請妥善保留產品保固卡以維護權益。

1、保固範圍

a. 產品於正常使用及維護下，主體骨架為 2 年期保固。
b. 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。

2、非保固範圍

a. 耗材配件不列入保固範圍，如：輪胎、剎車、座墊、腳墊、握把...等。
b. 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成任何之損傷者。
c. 自行拆裝、任意變換部品規格零件亦或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損傷者。
d. 無法辨識本公司之產品標籤且遺失保固卡者。
e. 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。

醫療器材商名稱：光星骨科復健器材股份有限公司
醫療器材商地址：台中市神岡區豐洲路 1096 號
製造業者名稱： NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC. (VIETNAM)
製造業者地址： NO. NA4, MY PHUOC 2ND INDUSTRIAL PARK, BEN CAT DISTRICT, BINH DUONG PROVINCE, VIETNAM

八、維修紀錄

Checked 檢查 / Substituted 替換 / Repaired 修理

日期	部位	C / S / R	簽章

本產品實際規格請依現貨為準，若有變動恕不另行通知，公司保留所有權利。
Copyright © 2026 Nova Orthopedic & Rehabilitation Appliances.,Inc. All rights reserved.



NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCES.,INC.

光星骨科復健器材股份有限公司

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路1096 號