光星骨科復健器材股份有限公司
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE .,INC

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路 1096 號

Nova 光星 SINCE 1981



GeLive
凝膠適型座墊

使用說明書

前言

- 序言：

  感謝您選擇使用本產品，建議您在首次操作產品前，請完整詳閱說明書，瞭解正確的使用知識與基本的保養維護。
  若有任何操作上的問題或其他的服務需求，請洽購買的專業經銷商諮詢。


- 設計理念：

  GeLive 凝膠適型座墊使用具有發泡微鳥巢結構體之動態吸壓醫療輔助墊為底座支撐，結合模組化枕型液態凝膠系統設計而成。針對褥瘡（壓瘡）形成的四大成因：壓力、剪力、溫度、濕度，提供相應對策和完整的舒適度，適用於行動力不足、需長時間乘坐輪椅者。

注意事項

- 請注意於輪椅安裝座墊後的重心變化，乘載重量分配不均時會增加翻覆的機率。安裝前務必諮詢治療師、專業原廠人員或經銷商，確保其安全性。
- 請勿於座墊上或周邊放置尖銳物品，以免造成凝膠破裂或商品損壞。
- 請避免受陽光直接照射，並應放置於乾燥陰涼處。
- 請注意 GeLive 凝膠適型座墊無治療疾病之醫療效能。
- 請務必正確安裝防水套，可防止因尿液或其他液體滲漏而造成泡棉損壞。
- 本產品屬於耗材配件不列入保固範圍。


部位介紹

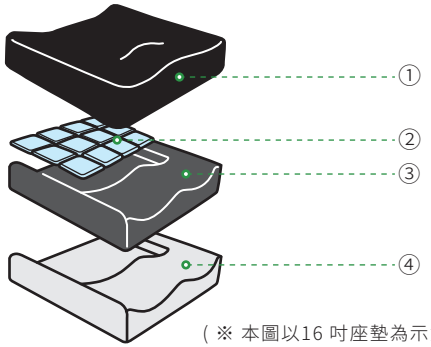

（※ 本圖以16 吋座墊為示意。）


① 防剪力雙層滑布外覆套 (包邊：透氣潛水布 / 座底：滴膠止滑點)
② 模組化枕型液態凝膠系統
③ 防水層
④ 高密度泡棉層 (台灣專利字號：M544300 - 具有發泡微鳥巢結構體之動態吸壓醫療輔助墊)

技術規格

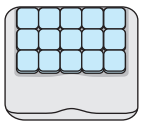產品名稱	GeLive 凝膠適型座墊	
產品規格	16 吋	18 吋
產品示意		
主體材質	高分子液態凝膠 (聚氨酯水膠)、高密度泡棉	
包邊顏色	普魯士藍	
產品尺寸	W400 x D400 x H82mm	W455 x D400 x H82 mm
產品重量	2790 g	3800 g
最大荷重	100 kg	110 kg

日常保養

- 本產品各部件都能相互分離，易於清潔及維護產品品質。
- 為延長產品的壽命，清洗①③布套時，請勿使用洗衣機或烘衣機，建議使用清水手洗即可；布套清洗後，請於室內陰乾即可，切勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將④高密度泡棉層浸泡於水或任何液體中，並避免受陽光直接照射，以防止座墊變色或損壞。

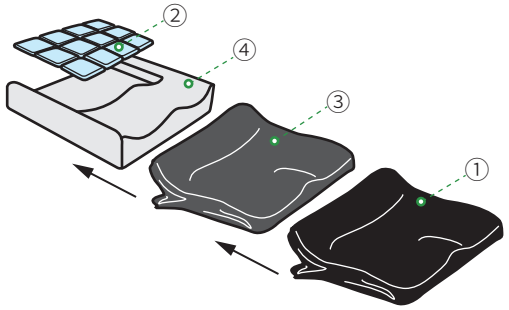

座墊可調整性

若需調整凝膠數量及排列位置時，請務必諮詢治療師、專業原廠人員或經銷商，以確保其坐姿安全及穩定性。

16 吋　　18 吋

