產品保固卡

銷售日期： 年 月 日
銷售人員簽章
經銷商店章

Nova光星 SINCE 1981



四點手杖

使用說明書/保固卡

NOVA醫療用手杖(未滅菌)

衛部醫器製壹登字第004666號

前言

- 序言：

  感謝您選擇使用本產品，建議您在首次操作產品前，請完整詳閱說明書，瞭解正確的使用知識與基本的保養維護，讓您擁有更完善的照護與行動力。
  若有任何操作上的問題或其他的服務需求，請洽購買的專業經銷商諮詢。

- 設計理念：

  四點式的底座設計加強了站立或行走時的穩定度與支撐力，以減緩下肢或關節、身體骨骼的負荷。主體採鋁合金作為材質以兼具輕量化與安全性，主體上部偏移後的手握把位置更貼近於整體重心，可增加使用時的安全性與減低手腕的負擔。

注意事項

- 使用時請務必確認手杖高度、使用方向是否正確。
- 使用手杖時，請穿著合腳防滑的鞋子，若更換鞋子有落差之時，務必微調高度後再使用，以達最佳使用效果避免造成傷害。
- 不可使用手杖敲打重物或支撐其他重物，以免造成結構之破壞。
- 使用前必須檢查主體結構是否變形，螺絲是否鎖緊，腳墊有無碎裂等情形。
- 若要使用手杖來上下樓梯時，請務必先熟悉使用方式再進行，以免發生危險。
- 避免於地面潮濕、光線不足及有障礙物時行走，以免滑倒或絆倒。
- 當使用者初次使用或身體狀況不佳時，建議有陪同人員協助，避免獨自使用以確保安全。

部位介紹



① 握把	② 銅珠
③ 鋁帽	④ 腳墊

技術規格

- 主體材質：鋁合金
- 主體管徑：七分 (22.2mm)
- 握把材質：TPR
- 最大荷重：100 kg
- 調整段數：十段

產品名稱	適用身高	調整高度
5620 四點手杖 (小底座)	130-170cm	64.5-87.5cm
5610 四點手杖 (大底座)		
5650 四點手杖 (高底座)	160-190cm	79-99cm

日常保養

1、基礎清潔

- 清潔產品時，請勿使用含任何化學物品之清潔劑，用乾布擦拭即可。

2、日常檢驗

- 檢查骨架結構是否有彎曲變形而產生高低落差。
- 檢查是否有任何零件鬆動或損壞。
- 使用過程中是否流暢且無任何異音出現。
- 當腳墊、握把...等耗材磨損嚴重時，請至經銷商檢查並更換新配件，以確保使用者安全。

保固說明

1、保固範圍


- 產品於正常使用及維護下，主體骨架為兩年期保固。
- 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。

2、非保固範圍

- 耗材配件不列入保固範圍，如：腳墊、握把...等。
- 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成任何之損傷者。
- 自行拆裝、任意變換部品規格零件亦或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損傷者。
- 無法辨識本公司之產品標籤且遺失保固卡者。
- 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。


如何調整手杖高度

- 旋開連接外管與內管的鋁帽，鬆脫即可不需轉至全開。
- 按下銅珠，同時將內管稍微旋轉即可上下調整長度。
- 確定位置後，務必使銅珠彈出調整孔以維持調整後的手杖長度。
- 旋緊連接外管與內管的鋁帽。

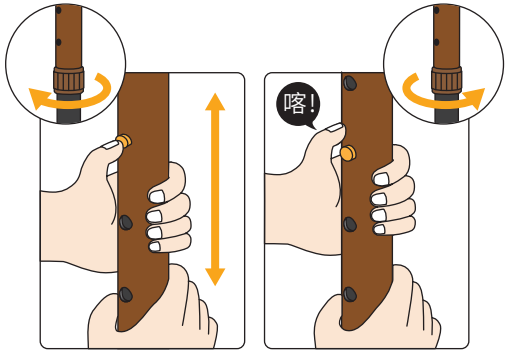


如何調整手杖方向

- 旋開連接外管與內管的鋁帽，鬆脫即可不需轉至全開。
- 按下銅珠，同時將外管旋轉，再使調整孔位轉向至後側位置。
- 確定位置後，務必使銅珠彈出調整孔以維持調整後的手杖長度。
- 旋緊連接外管與內管的鋁帽。

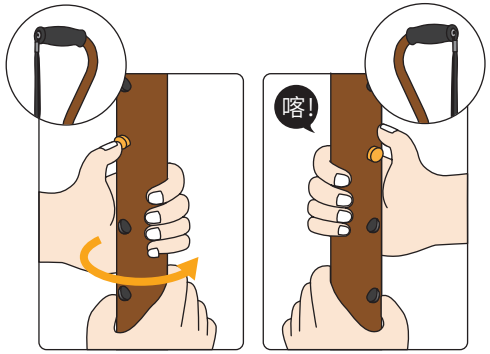


如何調整適合自己的高度

- 穿著日常行走的鞋子。
- 手杖握把朝內且須平行於腰部或臀部。
- 將手杖放置在前方與側邊各 15-20cm 的距離，手肘彎曲約 30-40 度。

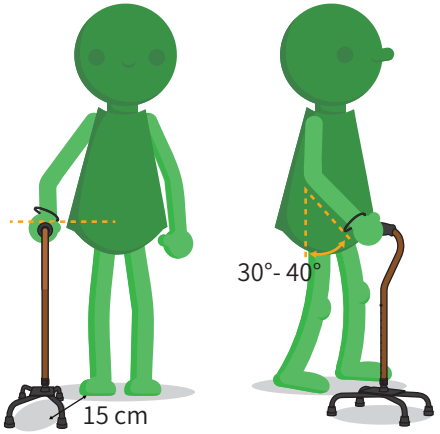


安全提示

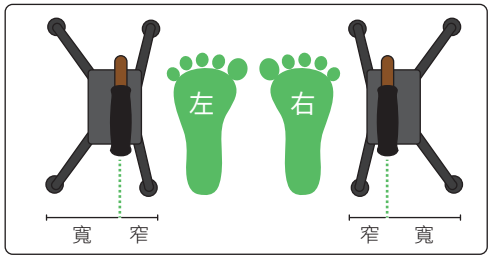


⚠ 更換主體調整管之方向即可分左右邊使用。

⚠ 握把中心窄邊靠近身體為正確使用方向。

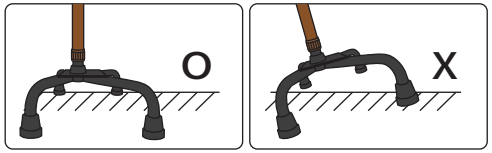

⚠ 使用時手杖必須完全著地，不可傾斜，以免造成危險。

如何使用手杖行走

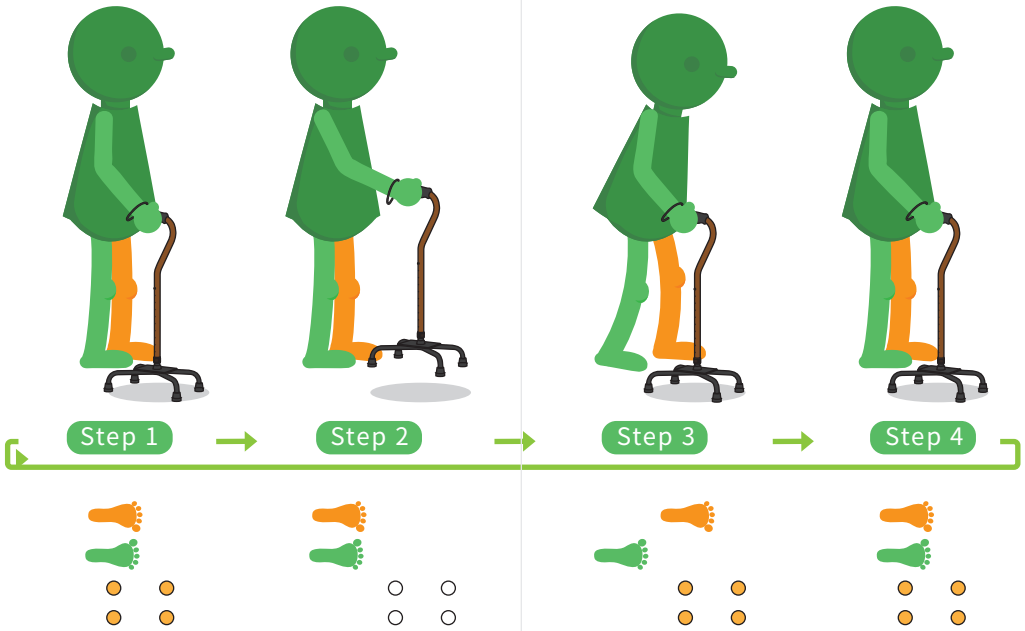

使用步驟說明

Step 1

緊握手握把，兩腳平行，並將手杖支撐於健側腳旁。

Step 2

將四腳拐上提且往前移動約15-20公分，放下後請確認四腳都有確實著地。

Step 3

透過手握把支撐將身體重心向前，將患側腳跨出，位置約與手杖中心平行。

Step 4

將健側腳跨前與患側腳齊平並緩慢著地，接著重複以上動作並以小步伐慢速行走以維持平衡。

：患側腳　：健側腳

光星骨科復健器材股份有限公司
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE ,INC

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路1096號