
光星骨科復健器材股份有限公司
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCES., INC.

8400鋁製便器椅
產品使用說明書
&
保固卡

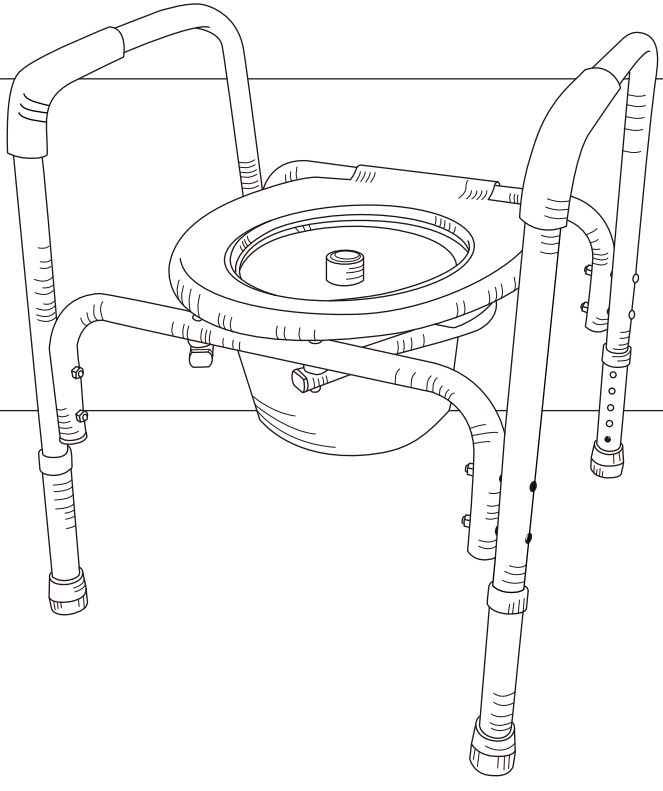


ISO-13485

探索光星

台灣製造

8400便器椅各部位零件拆解說明

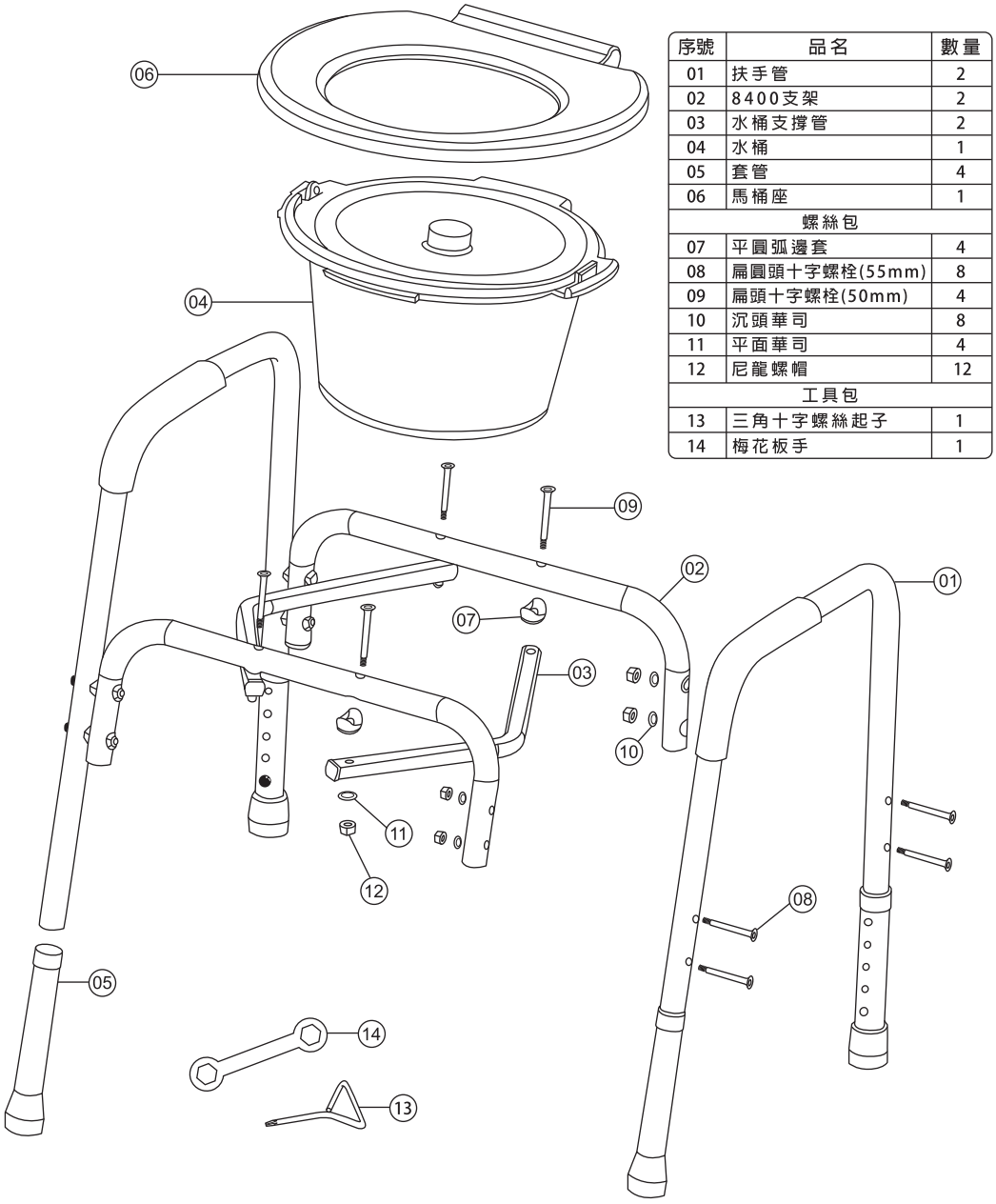


序號	品名	數量
01	扶手管	2
02	8400支架	2
03	水桶支撐管	2
04	水桶	1
05	套管	4
06	馬桶座	1
螺絲包		
07	平圓弧邊套	4
08	扁圓頭十字螺栓(55mm)	8
09	扁頭十字螺栓(50mm)	4
10	沉頭華司	8
11	平面華司	4
12	尼龍螺帽	12
工具包		
13	三角十字螺絲起子	1
14	梅花板手	1

開箱後請務必檢查以下零件是否齊全，以確保您的權益：


扶手管、8400支架、水桶支撐管、馬桶座、水桶、套管、螺絲包、工具包。

8400便器椅組裝說明

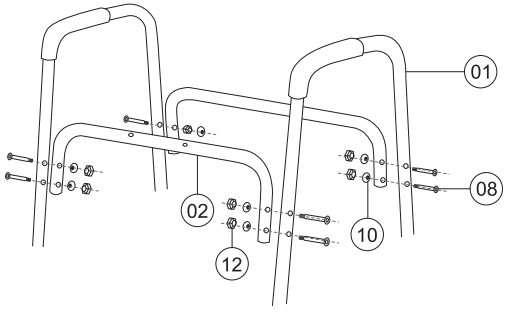


步驟一：組裝扶手管與支架

1. 將8400支架放置於扶手管之間。
2. 將扁圓頭十字螺栓(55mm長)、沉頭華司及尼龍螺帽依圖示鎖附確實。
3. 扶手管與8400支架之間的組裝共需鎖附8組螺栓。

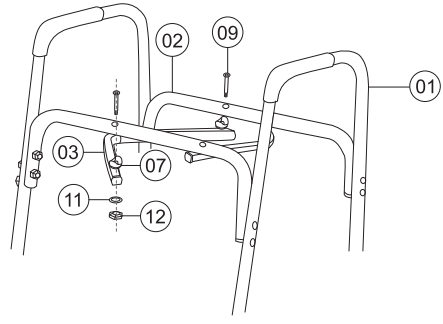


步驟二：組裝水桶支撐管

1. 依圖示將水桶支撐管放置於8400支架的下方。
2. 將扁頭十字螺栓(50mm長)、平圓弧邊套、平面華司及尼龍螺帽依圖示鎖附確實。
3. 水桶支撐管與8400支架之間的組裝共需鎖附4組螺栓。

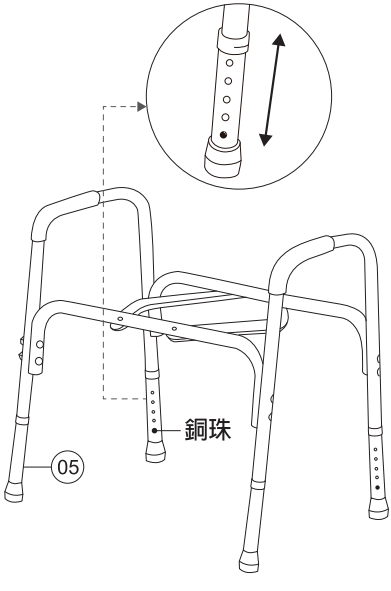


步驟三：調整套管

1. 透過套管高度調整，將座高調整到合適的高度。
2. 確認銅珠有確實彈出套管調整孔。

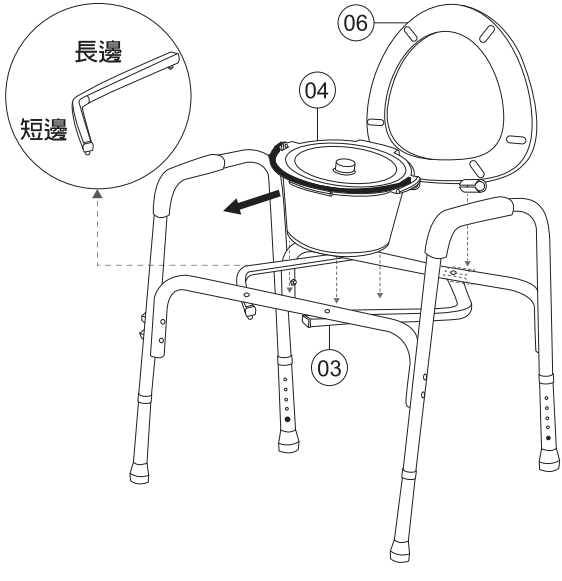


步驟四：組裝馬桶座與水桶

1. 放置水桶到水桶支撐管上，水桶提把需朝向短邊支撐管(朝前方)，如圖所示。
2. 將馬桶座嵌入到與長邊支撐管同方向的支架管上，如圖所示。

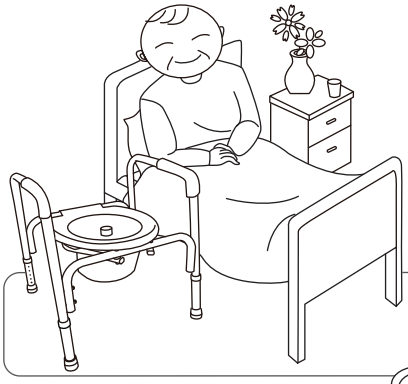

組裝 ◀

附上貼心組裝工具包，
隨時隨地即可組裝使用。

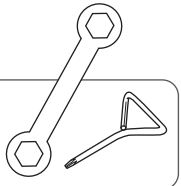



▶ 適用對象

臥病在床、行動不便之老年人、雙腿無力者、
傷殘人士、孕婦等...，皆可使用。

水桶 ◀


附有提耳、提把、蓋子，
清理好方便。

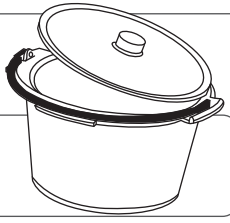

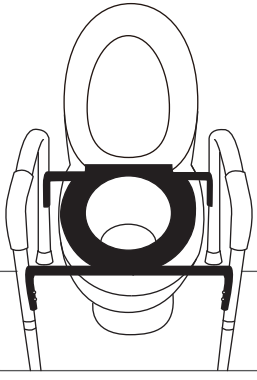

安全扶手 ◀


扶手設計讓起身時身體有支撐點，
防止因重心不穩而跌倒。

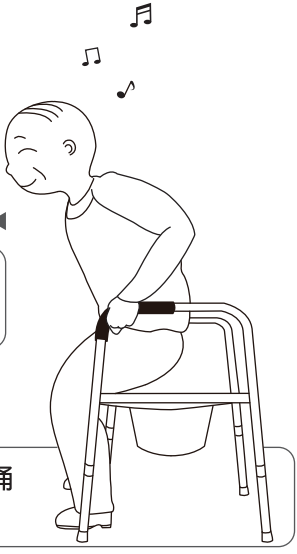


▶ 馬桶增高

直接放置於一般馬桶上，解決因馬桶
過低造成之起身困難。


產 品 分 鏡 圖

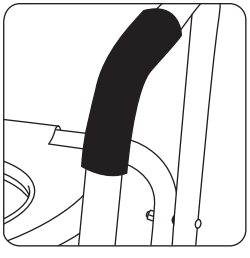


舒適泡棉扶手。

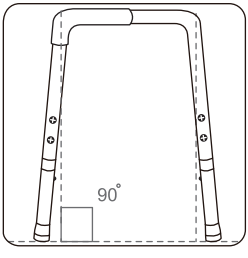

八字腳架設計，
穩固安全NO.1。

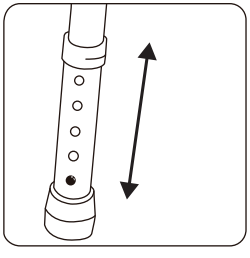

五段高度調整。

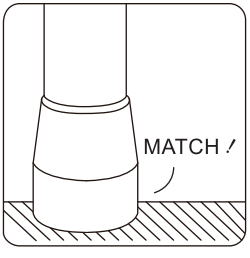

防滑橡膠腳墊，
提升使用安全。

8400便器椅保固卡

您所購買的8400鋁製便器椅皆經由本公司出廠認可，本產品保固以經銷商蓋印之所載日期算起，請您妥善保留本說明書以維護權益。

以下為注意事項

一. 保固範圍：

8400鋁製便器椅於正常使用狀況之下，主體管件為兩年期保固。

若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。

二. 非保固範圍：

若因以下因素引起之產品損壞或不良，本公司將有權利酌收部品及維修費用：

a. 耗材類部品不列入保固範圍，如：泡棉扶手、腳墊、水桶、馬桶座...等。

b. 因天災，不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成之損傷者。

c. 任意變換部品規格或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損壞者。

d. 無法辨識本公司之產品標籤或遺失保卡者。

e. 經本公司專業人員判斷後，認定為非保固範圍之狀況者。

銷售日期	年　　月　　日
經手人員	店章或簽名

NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCES INC.

Web:http://www.novaortho.com.tw
E-mail:service@novaortho.com.tw
地址：台中市神岡區豐洲路1096號
電話：04-25626762
傳真：04-25626546
免費客服：0800-036-678