## 產品保固卡

銷售日期：　　年　　月　　日

銷售人員簽章

經銷商店章

Nova光星 SINCE 1981



# 馬桶增高座

使用說明書/保固卡

## 前言

- 序言：

  感謝您選擇使用本產品，建議您在首次操作產品前，請完整詳閱說明書，瞭解正確的使用知識與基本的保養維護。若有任何操作上的問題或其他的服務需求，請洽購買的專業經銷商諮詢。

- 設計理念：


  以安全與穩定為主軸所發想的支架式馬桶增高器，能輕鬆安裝於日常使用之馬桶座。調整至適合的乘坐高度，以降低坐下與起身的負擔風險。適合膝關節無法穩定站立或下肢肌力不足的使用者。

## 注意事項

- 當使用者初次使用或身體狀況不佳時，建議有陪同人員協助，避免獨自使用以確保安全。
- 乘坐時，若雙腳與地面有落差，請務必調整支架高度至雙腳可以完全踩到地面後再使用，避免造成傷害。
- 使用前必須檢查骨架結構是否變形，螺絲是否鎖緊，座墊有無碎裂等情形。
- 本產品不適用特殊規格馬桶，如：長方型、尖型等。
- 若已安裝免治馬桶則不適用本產品。


## 技術規格

- 俯視圖

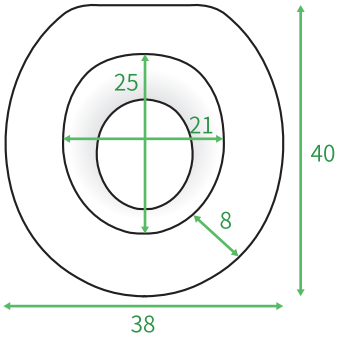


(單位：cm)

- 前視圖

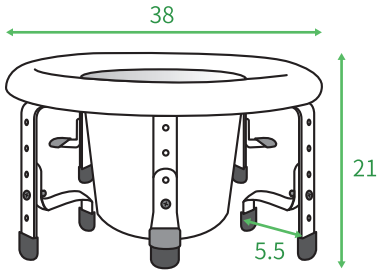


- 品名：8300 標準型馬桶增高座
- 主體材質：鋁合金 (支架)
- 馬桶座墊材質：塑膠
- 主體顏色：白色
- 馬桶外緣寬/深：38/40cm
- 馬桶內緣寬/深：21/25cm
- 座墊寬度：8cm
- 座高調整：10-20cm (四段高度可調)
- 產品重量：1.52kg
- 最大荷重：100kg

( 誤差範圍：±1cm ±0.5kg )

## 保固說明


1、保固範圍

- 產品於正常使用及維護下，主體骨架為兩年保固。
- 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。

2、非保固範圍

- 耗材配件不列入保固範圍，如：馬桶座、螺絲零件...等。
- 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成任何之損傷者。
- 自行拆裝、任意變換部品規格零件亦或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損傷者。
- 無法辨識本公司之產品標籤且遺失保固卡者。
- 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。

## 部位介紹

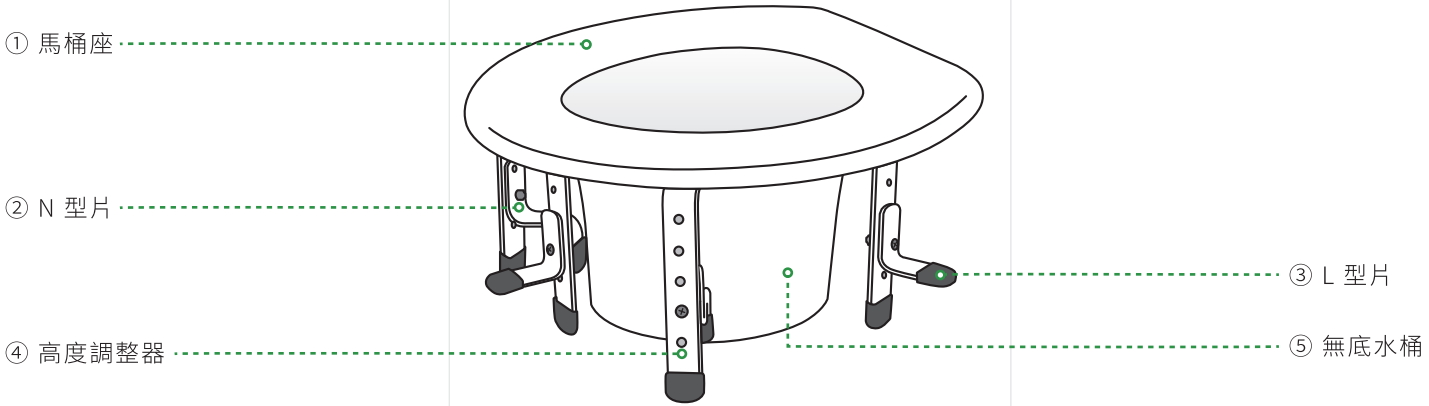


## 日常保養


1、基礎清潔

- 清潔產品時，請勿使用含任何化學物品之清潔劑，用乾布擦拭即可。

2、日常檢驗

- 檢查骨架結構是否有彎曲變形而產生高低落差。
- 檢查是否有任何零件鬆動或損壞。
- 使用過程中是否流暢且無任何異音出現。
- 當馬桶座、螺絲零件...等耗材磨損嚴重時，請至經銷商檢查並更換新配件，以確保使用者安全。


## 使用說明(一)

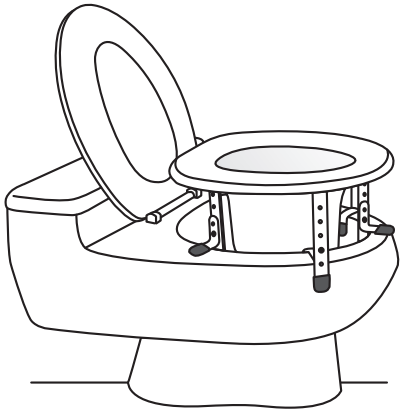

當您購買本產品回家時，不須再經由組裝，即可把馬桶增高器放在馬桶上使用。

- 馬桶外緣全寬要小於 38cm，才可適用。
- 馬桶內緣寬度要大於 22cm、內緣長度要大於 26cm，才可適用。
- 馬桶壁厚度要小於 5.5cm，才可適用。

## 使用說明(二)

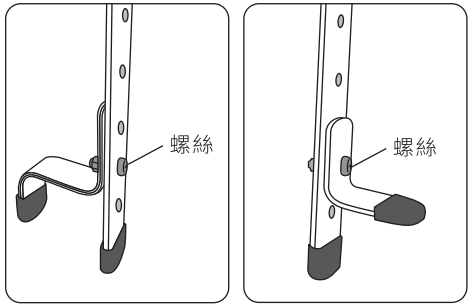


調整高度時，您只需要將高度調整器上之螺絲旋轉開來，並依序將 L 及 N 型片移動至適合的孔位，再旋緊螺絲即可。

調整高度時，五個螺絲一定要分別放置於相同高度的孔位，並且皆要鎖緊，方可使用本產品。

光星骨科復健器材(股)公司
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCES, INC.

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路 1096、1102 號