NOVARC

擺位型輪椅



Seating Base

Nova 光星 SINCE 1981

NOVARC

方舟啟航
陪你邁向未來與夢想





CONTENTS

03 關於 NOVARC

04 部位介紹

05 功能特色

07 其他特色

11 坐姿系統

13 車體顏色

15 技術規格

16 配件一覽表

17 勾選表單

NOVAdaptive Rotation in Space Chair



NOVARC
擺位型輪椅

關於

NOVARC 擺位型輪椅具備超高調整骨架結構，可彈性適應肢體成長、軀幹變化的各種階段。搭配坐姿系統來支撐軀幹，並且透過空中傾倒與仰躺之功能來改變坐姿擺位，以達到更全面的減壓效果。提升照護者及乘坐者的舒適生活體驗，以創造無限發展可能。



部位介紹


頭靠 (選配)
空中傾倒拉桿
背靠組 (選配)
座墊 (選配)
座板 (選配)
垂直調整腳踏組 (選配)
7” PU 前輪
高度可調式手推把
仰躺拉桿
鼓式介護剎車
高度 / 角度可調可掀式扶手
運輸固定扣環
腳踏駐車
3” 防傾輪組
12” PU 後輪
手板駐車

TR
169°

舒適生活，169° 極致展開

Tilt in space 空中傾倒

-4°~49° 傾鬆，減壓

空中傾倒 (Tilt in space) 功能可在不改變乘坐者的身體角度之下，輕鬆變換坐姿。

+ 後傾角度 0°~49°：不只有軀幹減壓的效果，還可避免產生剪力，防止身體前滑。
+ 前傾角度 0°~-4°：貼心設計前傾功能，微幅傾角，讓照護者能協助乘坐者輕鬆起身。



Recline 仰躺

0°~30° 仰臥，易展

仰躺 (Recline) 功能改變座面及靠背的角度，提供久坐者適當的下肢伸展，減壓之於也增加乘坐的舒適感。此外，仰躺連動式扶手讓使用者在不同姿勢變換下，手部也能擁有舒適的支撐。



Tilt + Recline

最大可達 169° 平躺角度

機械式空中傾倒 + 仰躺，最大可達 169° 之平躺角度。隨著座椅傾角增大，乘坐壓力也能從單點分散至全身，舒緩臀部壓力的同時，也可保有穩定的擺位來提升照護與生活便利性。



超高調整，為你而伸

能陪你長大的夥伴

專為成長中孩童設計，骨架結構具有高度的成長調整性，座寬、座深、扶手高度與角度...，皆可依照乘坐者身形尺寸量身定位。超越特製的表現，彈性適應肢體成長、軀幹變化的各種階段，從幼稚園到成人，一台輪椅陪你長大！



不只輕量，更是穩固

以鋁合金作為車體骨架支撐，輕量、堅韌。配備核心機構船型滑軌，採用 SUS304 不銹鋼材，耐蝕、強固。電腦雷射切割打造精準節距，傾倒角度 13 段調整，節節到位，提升空中傾倒時的動態穩定性。



舒適照護

小空間也能靈活轉彎

車身小、前後輪軸距短，可順暢的以最小迴轉半徑完成轉彎。



高度可調式手推把

多達十段高度可調整，應付各種身高之介護者需求。完全收合時也可縮減運輸時體積。





一抽即闔，簡易收折

抽出定位插銷即可快速收合車體，減少50% 車體體積，能輕鬆置入中小型休旅車後車廂運輸載送，外出方便不受限。



收合體積

長：89cm
寬：座寬+20cm
高：65cm
（含座背板，不含其他配件。）

安全安心

運輸固定扣環

前後左右配備四組運輸固定扣環，和孩子出遊的同時，安全不妥協。



多重剎車系統



鼓式介護剎車



腳踏駐車



手扳駐車

上坡安心



防傾輪組

擺位，量身適配

spex® 坐姿系統

全車適用紐西蘭品牌 Spex Seating 坐姿系統，由專業治療師親自協助，以使用者及照護者需求為中心，將身體功能發揮最大化為最終目標，搭配出更個人化、更舒適的擺位。

+ 更多資訊，請參閱 Seating-Shaping 目錄。





頭靠子系統

頭靠墊・頭靠支架

頭部常常是誘發個案張力和反射的來源，良好的頭靠能夠減少張力的產生，協助個案本身更能夠自主控制，增進學習行為。



軀幹子系統

背靠・軀幹側支撐

當個案軀幹控制不佳或有脊椎側彎的情況時，側支撐能夠提供身體側邊的支撐以協助軀幹穩定與維持。



底座子系統

座墊・硬座板・大腿分隔・扶手腿撐

符合身形的輪椅乃是坐姿好壞與否的根本，穩定的骨盆是支撐上肢及軀幹的基礎。而透過髖、膝、踝關節來分散壓力，可大幅降低臀部因久坐而產生壓瘡之風險。



綁帶子系統

骨盆帶・肩胸綁帶・上下肢綁帶

協助軀幹和肩胛位置的控制，減少因不正常的張力而引起的動作，提升乘坐的安全性。

百變風格，最佳決色

櫻桃紅



珍珠橘



玫瑰金



迷彩灰





天空藍



Color
Your
Life

技術規格

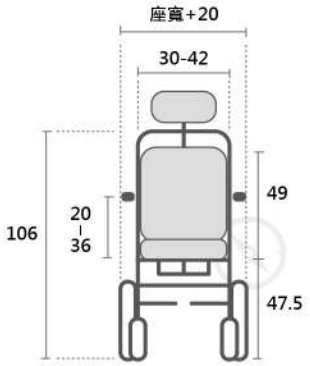

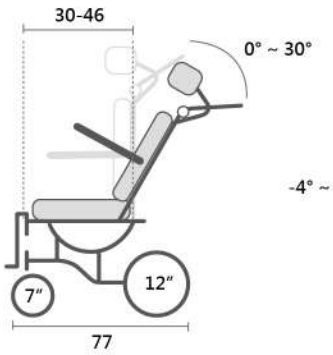



座椅寬度	30~ 42 cm (2 cm 間距) (可調)
座椅深度	30~ 46 cm (2 cm 間距) (可調)
背管長度	49 cm
座椅高度	47.5 cm
扶手高度	20 ~ 36 cm (可調)
仰躺角度	0° ~ 30°
空傾角度	-4° ~ 49°
前輪直徑	7″
後輪直徑	12″
車體全高	106 cm (不含配件)
車體全寬	座寬 + 20 cm
車體全長	77 cm
收合體積	長 89 cm x 寬 W/C+20 cm x 高 65 cm (含座背板，不含其他配件)
車體重量	22.3 kg (不含配件)
最大載重	100 kg

誤差值範圍：±1cm ±0.5kg

配件一覽表

頭靠



多段調整舒適頭靠
(靠墊 31x13x7.5cm)

側支撐



多角度快開式側支撐
(S 擋墊 15x10cm)



多角度快開式側支撐
(M 擋墊 15x15cm)

背靠組



標準型背靠組

座板



標準型座板

腳綁帶



小腿帶(標配)



中間可拆小腿帶



一字便利綁帶(150cm)



一字便利腿帶(70cm/2入)

腳架



77°



80°



90°

踏板



角度固定兩片式



角度可調兩片式



角度可調一片式



外掛式踏板組



垂直調整腳架組

勾選表單

客戶：　　經銷商：

車體顏色

櫻桃紅	珍珠橘	玫瑰金	天空藍	迷彩灰
建議售價 35,000	建議售價 35,000	建議售價 35,000	建議售價 35,000	建議售價 36,500

車體

座寬 (CM)	30	32	34	36	38	40	42		
座深 (CM)	30	32	34	36	38	40	42	44	46

車體選配

高度可調式手推把	

腳架	建議售價
77 度 / 一對	1,400
80 度 / 一對	1,800
90 度 / 一對	

踏板樣式

			建議售價
兩片式塑踏板	角度固定		900
	角度可調		1,000
一片式鋁踏板	角度可調	踏板 32 cm	1,300
		踏板 34 cm	
		踏板 36 cm	
		踏板 38 cm	
		踏板 40 cm	1,400
		踏板 42 cm	
		踏板 44 cm	
外掛式腳踏組	踏板 (小) 9 cm	左	900
		右	900
	踏板 (中) 11.5 cm	左	900
		右	900
	踏板 (大) 14 cm	左	900
		右	900
垂直調整腳踏組	踏板 (小) 9 cm	左	1,500
		右	1,500
	踏板 (中) 11.5 cm	左	1,500
		右	1,500
	踏板 (大) 14 cm	左	1,550
		右	1,550

※ 若選擇搭配「一片式鋁踏板」，踏板長度須依據該座寬加上 2 cm，即為適合的踏板長度。
※ 座寬 36 cm 以下無法選擇「兩片式塑踏板」。
※ 「兩片式塑踏板」與「一片式鋁踏板」內含簡易小腿帶 (一吋寬)。

頭靠子系統

		建議售價
Nova / 多段調整舒適頭靠	靠墊 31 x 13 x 7.5 cm	3,500

軀幹子系統

		建議售價
Nova / 背靠組	30 x 34 cm	3,500
	32 x 36 cm	
	34 x 38 cm	
	36 x 40 cm	
	38 x 42 cm	
	40 x 44 cm	
	42 x 46 cm	
	背板扣具組	2,800

※ 背靠組含金屬背板與背墊，扣具組須另加購選配。

			建議售價
Nova / 多角度快開式側支撐	S 擋墊 (15 x 10 cm)	左	3,500
		右	3,500
	M 擋墊 (15 x 15 cm)	左	3,800
		右	3,800

底座子系統

		建議售價
Nova / 座板	30 x 49 cm	1,500
	32 x 49 cm	
	34 x 49 cm	
	36 x 49 cm	
	38 x 53 cm	
	40 x 53 cm	
	42 x 53 cm	
	座板扣具組	2,000

※ 座板不含座墊，扣具組須另加購選配。

綁帶子系統

			建議售價
肩胸綁帶	肩帶導流器		500
	一字型胸綁帶		標配
	X 型肩胸綁帶	小	1,450
		大	1,500
骨盆帶	標準型骨盆帶		標配
	2 點單拉襯墊型骨盆帶	小	950
		大	1,000
小腿擋帶	可分離式小腿帶 (符合適用坐寬)		1,300
小腿環帶	一字型便利腿帶 (長度 70cm / 2 入)		750

※ 欲搭配 Spex 坐姿系統，請參閱 Seating-Shaping 目錄。

※ 產品顏色、規格、售價請依系統公告為準，此資料僅供參考。 2025.ver01



產品顏色、規格、售價請依系統公告為準，此資料僅供參考。
Copyright © 2025 光星骨科復健器材股份有限公司版權所有

光星骨科復健器材(股)公司

T 0800-036-678
E service@novaortho.com.tw
W www.novaortho.com.tw
A 台中市神岡區豐洲路 1096 號

官方網站

2025. ①