產品保固卡

銷售日期：　　年　　月　　日
銷售人員簽章
經銷商店章

Nova光星 SINCE 1981



KING of KINGs 洗澡椅

使用說明書/保固卡

前言

- 序言：

  感謝您選擇使用本產品，建議您在首次操作產品前，請完整詳閱說明書，瞭解正確的使用知識與基本的保養維護。若有任何操作上的問題或其他的服務需求，請洽購買的專業經銷商諮詢。


- 設計理念：

  根據歐洲醫療器材法規MDR 745，獲得多項安全與品質最高標準認證，並採用符合 ISO 10993 的生物相容性材料製造。防滑刻紋椅面設計、防滑橡膠腳墊，搭配陽極處理鋁合金腳架，讓座椅在保有穩定的同時，也具備輕量特性。
  運用卡榫嵌入的接合技法，無需工具即可輕鬆組裝。將腳架調整至適合的乘坐高度，以降低坐下與起身的負擔風險。
  適合膝關節無法穩定站立或下肢肌力不足的使用者。

注意事項

- 使用洗澡椅時，建議於平地使用，避免於崎嶇地面使用，以免發生危險。
- 當使用者初次使用或身體狀況不佳時，建議有陪同人員協助，避免獨自使用以確保安全。
- 乘坐時，若雙腳與地面有落差，請務必調整支架高度至雙腳可以完全踩到地面後再使用，避免造成傷害。
- 請勿於洗澡椅上搖晃或站立，並注意身體移動時或有額外負重時產生的重心變化，乘載重量分配不均時會增加翻覆的機率。
- 請注意洗澡椅不得存放於室外。應盡量避免直照陽光，若無法避免時，請用遮蔽物將其蓋住。
- 洗澡椅最大載重為120公斤，含使用者本身體重及座上附載之物品的總重量。

部位介紹

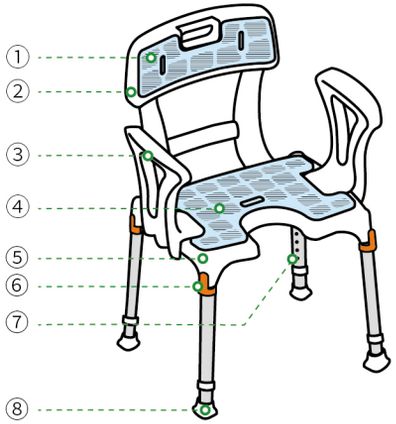

① 軟背墊	⑤ 椅座
② 背靠	⑥ 腳架卡榫
③ 扶手	⑦ 高度調整孔
④ 軟座墊	⑧ 防滑腳墊

技術規格

- 品名：KING of KINGs (KOK) 洗澡椅
- 主體材質：PP + 鋁合金 (腳架)
- 座椅材質：塑膠
- 軟墊材質：EVA
- 軟墊顏色：淡藍色
- 座面寬度：46 cm
- 座面深度：35 cm
- 座高調整：39-54 cm (七段高度可調)
- 背靠高度：36 cm
- 扶手高度：23 cm
- 產品重量：3.6 kg
- 最大荷重：120 kg
- 產地：義大利

日常保養

1、基礎清潔

- 清潔產品時，請勿使用含任何化學物品之清潔劑，用乾布擦拭即可。

2、日常檢驗

- 檢查骨架結構是否有彎曲變形而產生高低落差。
- 檢查是否有任何零件鬆動或損壞。
- 使用過程中是否流暢且無任何異音出現。
- 當軟墊、腳墊...等耗材磨損嚴重時，請至經銷商檢查並更換新配件，以確保使用者安全。

保固說明


1、保固範圍

- 產品於正常使用及維護下，主體骨架為兩年期保固。
- 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。

2、非保固範圍

- 耗材配件不列入保固範圍，如：軟墊、腳墊...等。
- 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成任何之損傷者。
- 自行拆裝、任意變換部品規格零件亦或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損傷者。
- 無法辨識本公司之產品標籤且遺失保固卡者。
- 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。

組裝步驟

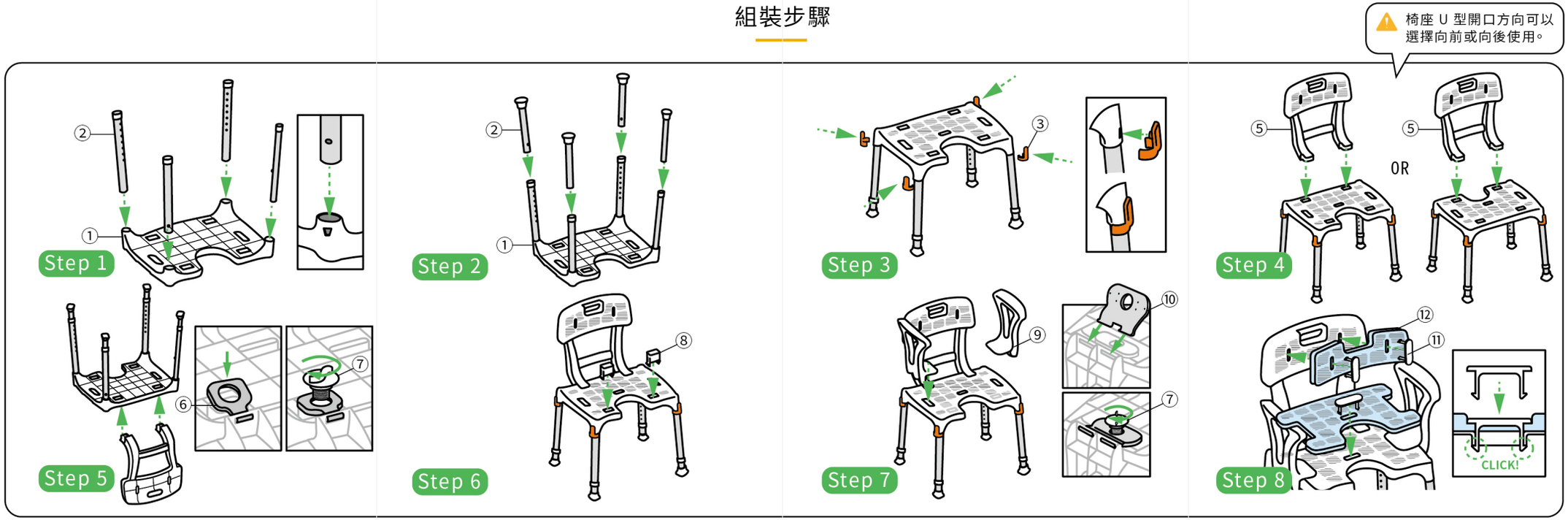


組裝零件



① 椅座 x1	② 上腳管 x4、下腳管 x4	③ 腳架卡榫 x4	④ 腳墊 x4
⑤ 背靠 x1	⑥ 背靠固定墊片 x2	⑦ 旋轉固定卡榫 x4	⑧ 座墊塞 x2
⑨ 扶手 x2	⑩ 扶手固定墊片 x2	⑪ 軟墊卡榫 x3	⑫ 軟座墊 x1 / 軟背墊 x1

如何調整高度

- 按下銅珠同時將內管稍微旋轉後即可上下調整內管高度。
- 沿著調整孔將洗澡椅調整到適合自己身形的高度。
- 確定位置後，務必使銅珠彈出調整孔，以維持調整後的洗澡椅高度。
- 洗澡椅的四根腳管須調整至相同高度後才可使用。

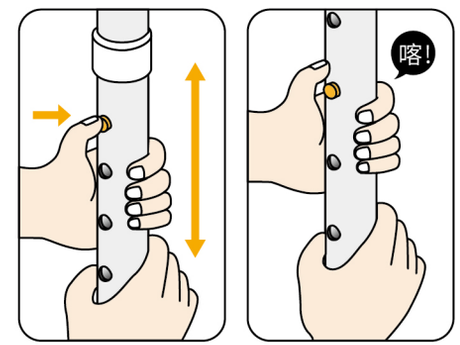

光星骨科復健器材股份有限公司
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE ,INC

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路 1096 號